

Kurzanleitung Offline Messung – Initialisierung

Samoa

Polygraphiegerät



1. Vorbereitung

Verbinden Sie Samoa per USB Anschlusskabel mit dem PC.




2. Aufzeichnung starten

2.1



Öffnen Sie die MiniScreen Viewer Software per Doppelklick auf das **MSV** Symbol auf dem Desktop

2.2

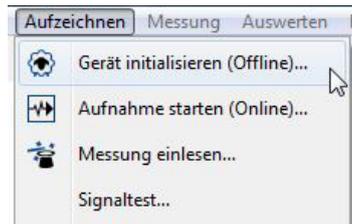


Wählen Sie unter **Aufzeichnen > Gerät initialisieren (Offline)** oder klicken Sie auf das Symbol  in der Menüleiste oder auf dem Dashboard.

2.3

Füllen Sie die Maske mit den Stammdaten des Patienten. Wählen Sie anschließend **Übertragung starten**.

2.4

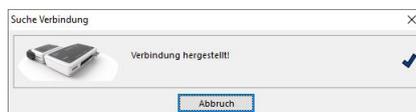

Die Verbindung zu Samoa wird aufgebaut.

2.5


Wählen Sie ggf. ein neues Kanalsset (**Kanalsset laden**) aus.

2.6



Wählen Sie das gewünschte Kanalsset aus der Liste aus.

2.7

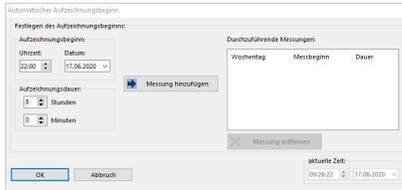


Sie haben die Möglichkeit das Gerät für einen **automatischen** (programmierten) oder **manuellen** Start zu initialisieren.

Programmierter Start: Weiter mit **2.8.1**

Manueller Start: Weiter mit **2.9.1**


2.8. Programmierter Start

2.8.1

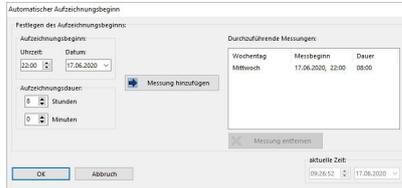

Legen Sie Aufzeichnungsbeginn und –dauer fest und klicken Sie anschließend auf **Messung hinzufügen**. Im rechten Fenster wird die programmierte Messung angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK**.


2.8.2

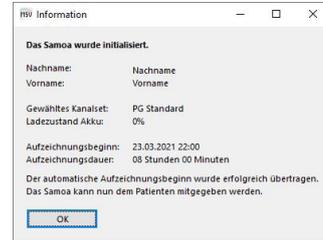

Es erscheint die folgende Meldung zur Kontrolle. Bestätigen Sie mit **OK**. Das Gerät beginnt zum programmierten Zeitpunkt automatisch zu messen.


2.9. Manueller Start

2.9.1

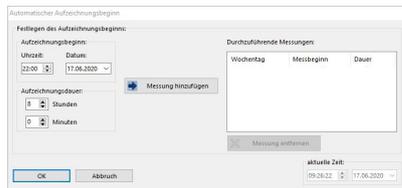

Bestätigen Sie den Dialog mit **OK**.

2.9.2

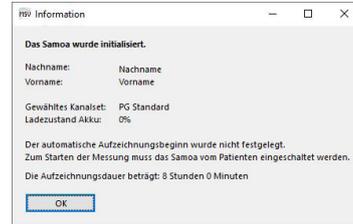


Es erscheint die folgende Meldung zur Kontrolle. Bestätigen Sie diese mit **OK**.

2.9.3

Patientenaktion zum Starten der manuellen Messung



Um die Messung manuell zu starten, schaltet der Patient Samoa zum entsprechenden Zeitpunkt durch Drücken auf die Ein/Aus Taste (2 Sekunden) ein.

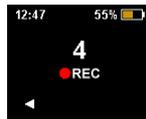


Der Patient kann nun durch Drücken der Pfeiltasten rechts die manuelle Messung starten. Wenn der Countdown auf 0 geht beginnt die Messung. Eine laufende Messung wird mit einem roten Punkt im Display gekennzeichnet.

3. Messung einlesen


Verbinden Sie Samoa per USB Anschlusskabel mit dem PC – siehe **1. Vorbereitung**

3.1

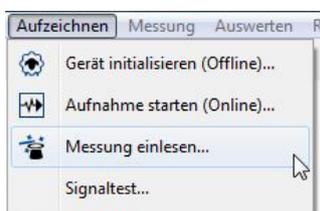

Wählen Sie unter **Aufzeichnen > Messung einlesen** oder klicken Sie auf das Symbol  in der Menüleiste oder auf dem Dashboard.

3.2

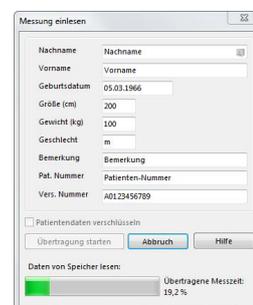

Die Daten werden aus dem Speicher ausgelesen.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-930
F. +49 2603 9600-40
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com

Menschen im Mittelpunkt

