

Samoa

Polígrafo



1. Preparación

Conecte Samoa al PC mediante el cable de conexión USB.




2. Iniciar el registro


2.1



Abra el software MiniScreen Viewer haciendo doble clic en el icono de **MSV** en el escritorio

2.2

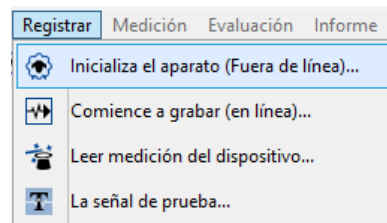


Seleccione en **Registrar > Inicializa el aparato (fuera de línea)** o haga clic en el icono  en la barra de menús o en el panel de control.

2.3

Rellene la pantalla con los datos principales del paciente. A continuación, seleccione **Iniciar transferencia**.

2.4

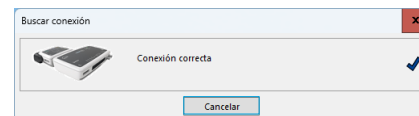


Se establece la conexión con Samoa.

2.5

En caso necesario, seleccione un nuevo conjunto de canales (**Cargar conjunto de canales**).

2.6

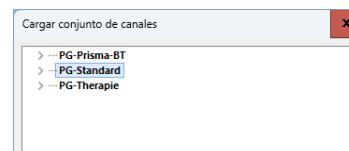

Seleccione el conjunto de canales deseado de la lista.

2.7

Tiene la posibilidad de inicializar el dispositivo para un inicio **automático** (programado) o **manual**.

Inicio programado: pase al punto **2.8.1**

Inicio manual: pase al punto **2.9.1**

2.8. Inicio programado

2.8.1

Establezca el inicio y la duración de la grabación y, a continuación, haga clic en **Añadir medición**. En la ventana derecha se muestra la medición programada. Confirme con **Aceptar**.

2.8.2

Aparecerá el siguiente mensaje de control. Confirme con **Aceptar**. El dispositivo comienza a medir automáticamente en el momento programado.

2.9. Inicio manual

2.9.1


Confirme el diálogo con **Aceptar**.

2.9.2


Aparecerá el siguiente mensaje de control. Confírmelo con **Aceptar**.

2.9.3

Acción del paciente para iniciar la medición manual

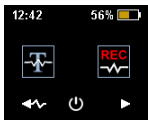

Para iniciar la medición manualmente, el paciente enciende Samoa en el momento adecuado pulsando el botón de encendido/apagado (2 segundos).

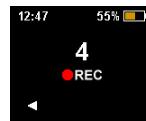


El paciente puede iniciar la medición manual pulsando las teclas de flecha de la derecha. Cuando la cuenta atrás llega a 0, comienza la medición. La medición en curso se marca con un punto rojo en la pantalla.

3. Leer medición

Conecte Samoa al PC mediante el cable de conexión USB – véase **1. Preparación**

3.1

Seleccione en **Registrar > Leer medición del dispositivo** o haga clic en el icono  en la barra de menús o en el panel de control.

3.2

Los datos se leen de la memoria.

Made in
Germany

Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Alemania

Distribución y servicio

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

