

Sonata

Polisomnografía



1. Preparación

Conecte Sonata al PC mediante el cable de conexión USB.




2. Iniciar el registro


2.1




Abra el software MiniScreen Viewer haciendo doble clic en el icono de **MSV** en el escritorio.

2.2

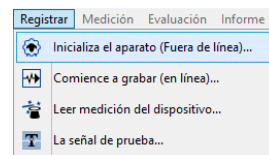


Seleccione en **Registrar > Inicializa el aparato (fuera de línea)** o haga clic en el icono  en la barra de menús o en el panel de control.

2.3

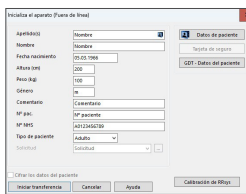


Rellene la pantalla con los datos principales del paciente. A continuación, seleccione **Iniciar transferencia**.

2.4

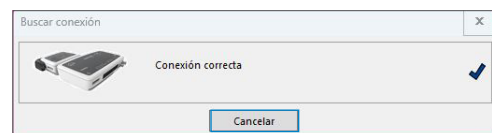


Se establece la conexión con Sonata.

2.5

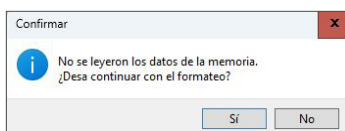


Atención. Cerciórese de que se han leído todos los datos del dispositivo. Confirme este mensaje con **Sí**.

2.6

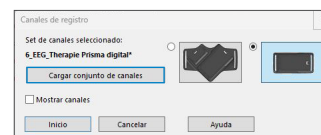


En caso necesario, seleccione un nuevo conjunto de canales (**Cargar conjunto de canales**).

2.7

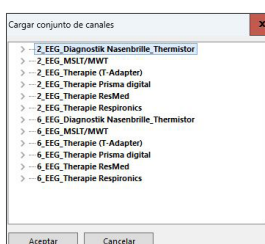

Seleccione el conjunto de canales deseado de la lista.

2.8

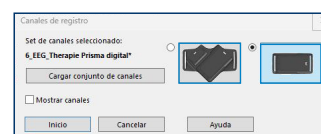


Seleccione la posición de retención del módulo principal y el módulo neurológico (forma en V u horizontal).

2.9.

Tiene la posibilidad de inicializar el dispositivo para un inicio **automático** (programado) o **manual**.


Inicio programado: pase al punto **2.10.1**

Inicio manual: pase al punto **2.11.1**

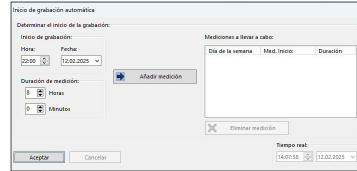


2.10. Inicio programado

2.10.1

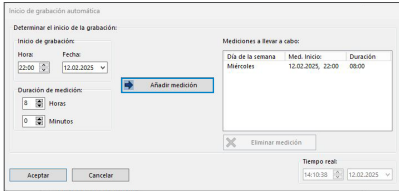

Establezca el inicio y la duración de la grabación y, a continuación, haga clic en **Añadir medición**. En la ventana derecha se muestra la medición programada. Confirme con **Aceptar**.


2.10.2

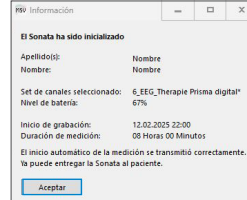

Aparecerá el siguiente mensaje de control. Confirme con **Aceptar**. El dispositivo comienza a medir automáticamente en el momento programado.


2.11. Inicio manual

2.11.1

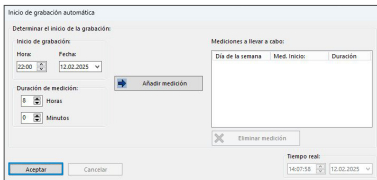


Confirme el diálogo con **Aceptar**.

2.11.2

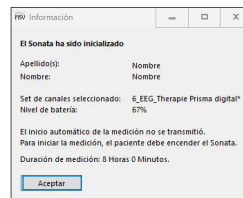

Aparecerá el siguiente mensaje de control. Confírmelo con **Aceptar**.

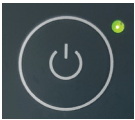



Para iniciar la medición manualmente, el paciente enciende Samoa en el momento adecuado pulsando el botón de encendido/apagado (2 segundos). Se muestra la medición en curso con un LED verde parpadeante con intervalos de 4 segundos.

3. Leer medición


Conecte Sonata al PC mediante el cable de conexión USB – véase **1. Preparación**.

3.1

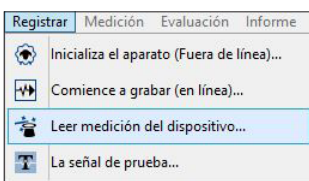

Seleccione en **Registrar > Leer medición del dispositivo** o haga clic en el icono  en la barra de menús o en el panel de control.

3.2

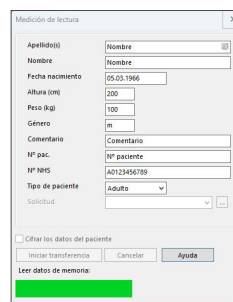

Los datos se leen de la memoria.

Made in
Germany

Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72144 Rangendingen, Alemania

Distribución y servicio

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



With people in mind

