

הנחיות קצרות למטופלים

סמואה

מכשיר פוליגרפיה

מטופל יקר,

הרופא שלך נתן לך מכשיר אבחון לבדיקה ביתית, שיכול לזהות הפרעת שינה אפשרית. בהוראות אלו נסביר כיצד להרכיב את המכשיר. לצורך בדיקה ללא שגיאות, נדרש ליישם את הבדיקה בצורה נכונה.

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Germany
טל +49 2603 9600-0
פקס +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com

loewensteinmedical.com



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Germany



© Copyright protected. Löwenstein Medical - שכפול מכל סוג רק באישור מפורש מ-.

סמואה

מכשיר פוליגרפיה. חכם, פשוט וקטן.

מכשיר בסיסי על חגורת חזה, המחזיקה את ה-Samoa על הגוף, וצינורית אף מחוברת מראש.



- 1 Samoa עם חגורת חזה
- 2 צינורית אף
- 3 חגורת בטן
- 4 חיישן אצבע
- 5 רצועת הצמדה לחיישן אצבע

למידע נוסף על סמואה:



איך אני מרכיב את מכשיר הפולגירף Samoa?



1. הנח את המכשיר עם חגורת חזה מעל החולצה ומתחת לבתי השחי. ה-Samoa צריכה להיות מותאמת בצורה יציבה אך נוחה. רק באופן זה, יעבדו החיישנים בצורה מהימנה.




2. שים את חגורת הבטן בגובה המותן. חיישן הלחץ (בלון) צריך להיות בחלק הפנימי של החגורה.



3. חבר את המחבר השחור בחגורת הבטן אל המחבר השחור בתחתית המכשיר והבריגו אותם יחד בכחצי סיבוב.



4. הנח את חיישן האצבע על הקמיצה. ראשית, יש לקצץ את הציפורן ולהסיר לק. הכנס את האצבע בשרוול החיישן האפור כך שהכבל יעבור על גב היד. חבר את הכבל עם רצועת ההצמדה לפרק כף היד.

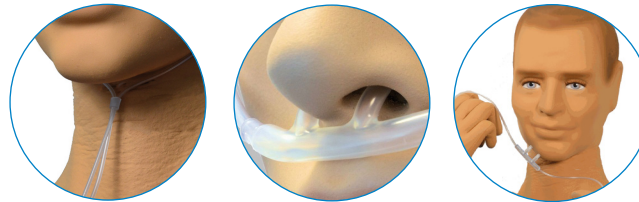

5. כעת, חבר את צינורית האף, הכנס את הצינוריות הקצרות הבולטות אל הנחיריים. יש להעביר את הצינור מאחורי האוזניים ומתחת לסנטר ולהדק אותו בטבעת הפלסטיק.



6. אם צינורית האף עדיין לא מחוברת, הברג אותה למחבר הלבן הנמצא בתחתית המכשיר.


התחל את ההקלטה

התחלה אוטומטית


ההקלטה מתחילה ונפסקת אוטומטית בזמנים שנקבעו במרפאת הרופא.

התחלה ידנית

כדי להתחיל הקלטה ידנית, לחץ על מקש התחל (⏮) למשך כ-2 שניות עד שהתצוגה תידלק והמסך המוצג כאן יופיע.

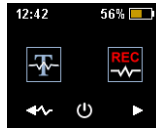

הקש על מקש החץ בצד ימין (➤). ההקלטה מתחילה כאשר הספירה לאחור מחמש (5) לאפס (0) מסתיימת. אור אדום מוצג בתצוגה במהלך ההקלטה.

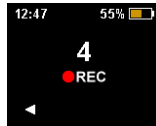

עצור את ההקלטה

המכשיר מסיים את ההקלטה באופן אוטומטי. אינך צריך לעשות דבר.

למחרת בבוקר כשההקלטה הסתיימה, נא להכניס את כל החלקים לתיק ולהחזיר אותו לרופא.

הערה: מסיבות היגייניות כדאי לשים את צינורית האף בשקית נפרדת!

ניטור טיפולי

לצורך ניטור טיפול במסיכה, הדק את מתאם ה-T למקומו בין הצינור למסיכה. הברג את הצינורית של המתאם אל המחבר הלבן הפנוי בתחתית המכשיר. אין להשתמש במחבר המיועד לצינורית האף!

