

Samoa

Apparecchio poligrafico



1. Preparazione

Collegare Samoa al PC utilizzando il cavo di collegamento USB.




2. Avvio di una nuova registrazione

2.1



Lanciare il software MiniScreen Viewer con un doppio clic sul simbolo **MSV** sul desktop

2.2

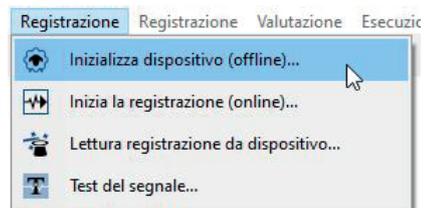


Selezionare **Registrazione > Inizializza dispositivo (offline)** o fare clic sul simbolo  nella barra dei menu o sul dashboard.

2.3

Compilare la maschera con i dati del paziente. Selezionare quindi **Inizia trasferimento**.

2.4

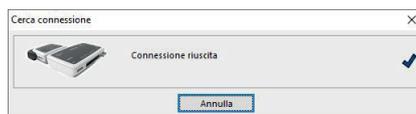


Viene effettuata la connessione a Samoa.

2.5


Selezionare eventualmente una nuova impostazione canale (**Carica impostazione canale**).

2.6

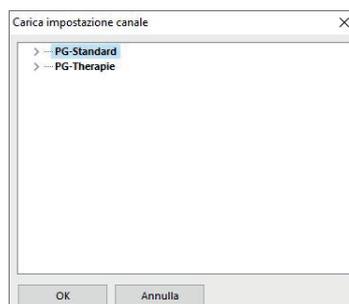

Selezionare l'impostazione canale desiderata dall'elenco.

2.7

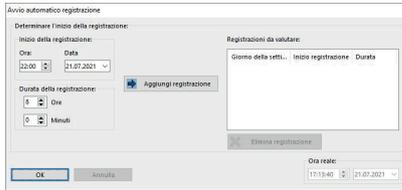


È possibile inizializzare il dispositivo per un avvio **automatico** (programmato) o **manuale**.

Avvio programmato: passare al **2.8.1**

Avvio manuale: passare al **2.9.1**


2.8. Avvio programmato

2.8.1

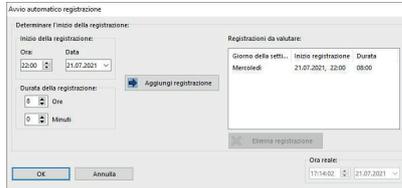

Determinare l'inizio della registrazione e la durata e quindi fare clic su **Aggiungi registrazione**. Nella finestra sulla destra viene visualizzata la registrazione programmata. Confermare con **OK**.


2.8.2

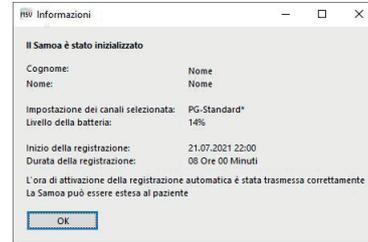

Viene visualizzato questo messaggio come verifica dei dati inseriti. Confermare con **OK**. L'apparecchio avvierà la registrazione automatica nel momento programmato.

2.9. Avvio manuale

2.9.1

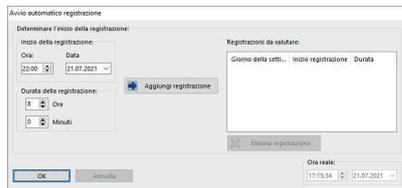

Confermare la finestra di dialogo con **OK**.


2.9.2




Viene visualizzato questo messaggio come verifica dei dati inseriti. Confermare con **OK**.

2.9.3

Avvio della registrazione manuale da parte del paziente

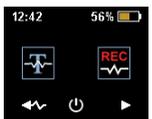

Per avviare la registrazione manuale il paziente accende Samoa al momento opportuno premendo il tasto on/off (2 secondi).

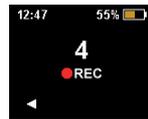


Il paziente può ora avviare la registrazione manuale premendo il tasto freccia a destra. La registrazione si avvia quando il conto alla rovescia raggiungerà lo 0. Una registrazione in corso è contrassegnata da un puntino rosso sul display.

3. Lettura della registrazione


Collegare Samoa al PC utilizzando il cavo di collegamento USB – ved. **1. Preparazione**

3.1

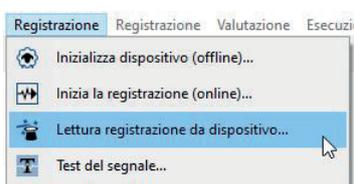

Selezionare **Registrazione > Lettura registrazione da dispositivo** o fare clic sul simbolo  nella barra dei menu o sul dashboard.

3.2

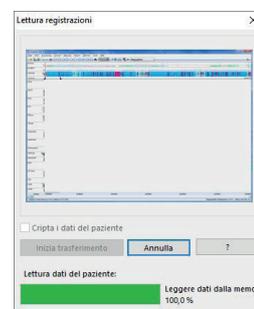

I dati vengono letti dalla memoria.



 Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-930
F. +49 2603 9600-40
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com

