

Skrócona instrukcja zapisu offline – inicjalizacja

Poligraf

Samoa



1. Przygotowanie

Połącz urządzenie Samoa przez Kabel połączeniowy USB do komputera.




2. Rozpocznij nagrywanie


2.1



Otwórz oprogramowanie MiniScreen Viewer, klikając dwukrotnie ikona MSV na pulpicie.

2.2

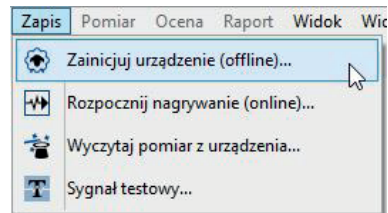


Wybierz **Zapis > Zainicjuj urządzenie (offline)** lub kliknąć symbol  w menu lub na panelu.

2.3

Dialog box 'Zainicjuj urządzenie (offline)' containing fields for: Nazwisko, Imię, Data urodzenia, Wzrost (cm), Waga (kg), Płeć, Komentarz 1, Nr Pacjenta, Nr. Ubezpieczenia, Typ pacjenta. Buttons: Dane pacjenta, Karta ubezpieczenia, Dane pacjenta GDT, Rozpocznij przesyłanie, Anuluj, Pomoc, Kalibracja PRStu.

Wypełnij pola danymi pacjenta. Następnie wybierz **Rozpocznij przesyłanie**.

2.4

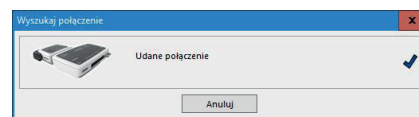


Zostaje nawiązane połączenie z urządzeniem Samoa.

2.5

Dialog box 'Kanały do nagrywania' showing 'Wybrany zestaw kanałów: PG-Therapie*'. Buttons: Załaduj zestaw kanałów, Pokaż kanały, OK, Anuluj, Pomoc.


W razie potrzeby wybierz nową grupę kanałów (**Załaduj zestaw kanałów**).

2.6

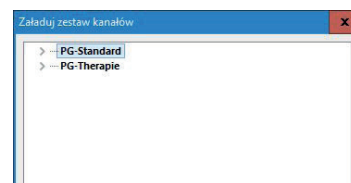

Wybierz grupę kanałów z listy.

2.7

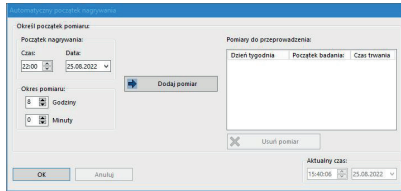


Możliwość inicjalizacji urządzenia do automatycznego (zaprogramowanego) lub ręcznego startu.

Zaprogramowana aktywacja zapisu: patrz dalej **2.8.1**

Manualna aktywacja zapisu: patrz dalej **2.9.1**


2.8 Zaprogramowana aktywacja zapisu

2.8.1

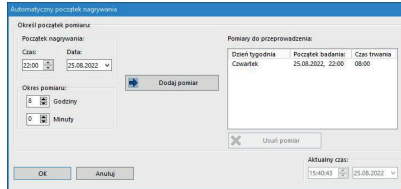

Określ początek i czas trwania rejestracji, a następnie kliknij **Dodaj pomiar**. Zaprogramowany pomiar jest wyświetlany w prawym oknie. Potwierdź za pomocą **OK**.


2.8.2

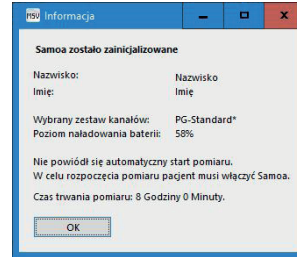

Następny komunikat stanowi potwierdzenie ustawień. Potwierdzić przyciskiem **OK**. Urządzenie automatycznie rozpocznie zapis w zaprogramowanym czasie.


2.9 Manualna aktywacja zapisu

2.9.1

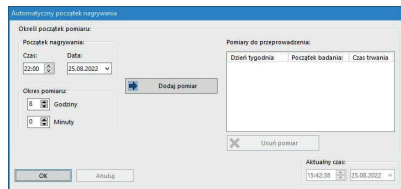

Potwierdź dialog przyciskiem **OK**.


2.9.2

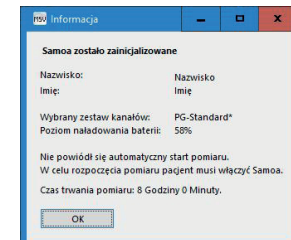


Następny komunikat stanowi potwierdzenie ustawień. Potwierdzić przyciskiem **OK**.

2.9.3

Pacjent aktywuje manualny pomiar

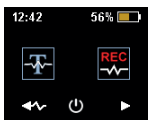

Aby rozpocząć pomiar manualnie, pacjent włącza urządzenie Samoa w odpowiednim czasie naciskając przycisk ON/OFF i przytrzymując go przez dwie sekundy.

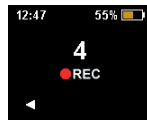



Teraz pacjent może manualnie rozpocząć pomiar przez naciśnięcie prawego przycisku kierunkowego ze strzałką. Pomiar rozpoczyna się po odliczeniu czasu do zera (0). Aktywny pomiar jest sygnalizowany przez czerwoną kropkę na wyświetlaczu.

3. Wczytywanie pomiaru


Podłącz urządzenie Samoa do komputera przy użyciu kabla USB. Patrz **1. Przygotowanie**

3.1

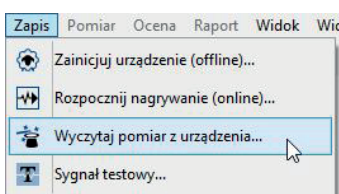

Wybierz **Zapis > Wczytaj pomiar z urządzenia** lub Kliknij symbol  w menu lub na panelu.

3.2

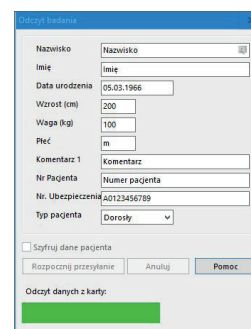

Dane zostają wczytane z pamięci.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Niemcy

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Niemcy
T. +49 2603 9600-930
F. +49 2603 9600-40

info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com

