

# Samoa

Polygraf.

Chytrý, jednoduchý, malý.

Základní jednotka s připojeným prsním popruhem, který současně upevňuje k tělu zařízení Samoa, včetně připojené nosní kanyly.



- 1 Samoa s prsním popruhem
- 2 Kyslíkové brýle
- 3 Břišní popruh
- 4 Prstový senzor
- 5 Suchý zip pro prstový senzor

Více informací o zařízení Samoa:



**LÖWENSTEIN**  
medical

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Německo  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH  
Daimlerstr. 23  
72414 Rangendingen, Německo



Stručný návod pro pacienta

# Samoa

Polygraf

Vážená pacientko,  
vážený paciente,

váš odborný lékař vám poskytl pro domácí použití diagnostické zařízení ke zjištění případných potíží s dýcháním během spánku. Pomocí tohoto návodu bychom vám rádi stručně vysvětlili použití a způsob nasazení zařízení.

Správné použití a nasazení zařízení Samoa je předpokladem bezchybného záznamu.



gba10455cz2501

© Chráněno autorským zákonem. Kopírování a šíření jakýmkoliv způsobem je dovoleno pouze na základě výslovného souhlasu společnosti Löwenstein.



## Jak si mám polygraf Samoa nasadit?



1. Zařízení s prsním popruhem si přiložte na triko pod paže. Zařízení Samoa musí být přiloženo pevně, ale současně pohodlně. Pouze v takovém případě pracují senzory spolehlivě.




2. Umístěte břišní popruh do výšky boků. Tlakový senzor musí být na vnitřní straně popruhu.



3. Přišroubujte černou přípojku břišního popruhu k černé koncovce na spodní straně zařízení, k přišroubování stačí zhruba jedna a půl otáčky.



4. Přiložte prstový senzor ideálně na prsteníček. Pokud je to možné, před použitím zastříhnete nehet na krátko a případně odstraňte lak. Vložte prst do šedé trubičky senzoru tak, aby kabel vedl po hřbetu ruky. Upevněte kabel suchým zipem k zápěstí.

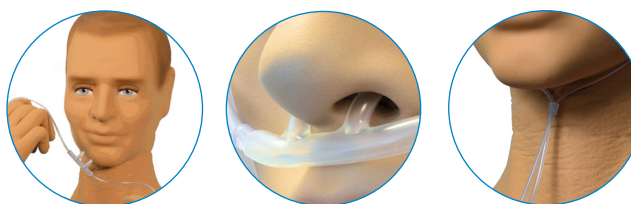


5. Nyní si nasadte kyslíkové brýle umístěním kanyl do nosních dírek. Hadičky vedte za ušima pod bradu, upevněte je plastovým kroužkem.



6. Pokud jste zatím nepřipojili nosní kanylu: Našroubujte nosní kanylu na spodní straně zařízení na volné bílé koncovky.

## Kontrola terapie


Při kontrolách terapie upevněte adaptér T mezi hadičku a masku. Našroubujte hadičku adaptéru T na spodní straně zařízení na volné bílé koncovky. **Nosní kanylu nepoužívejte!**

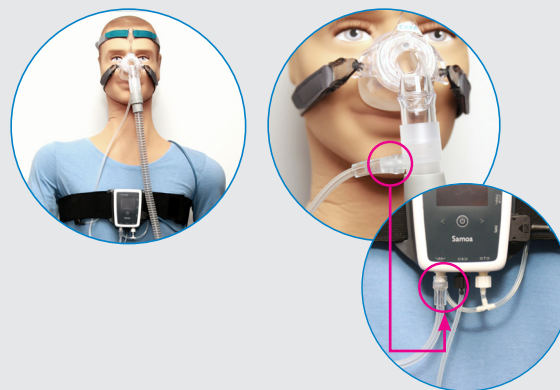

## Zahájení záznamu


### Automatické spuštění

Záznam začíná a končí automaticky v časech zadaných lékařem v ordinaci.

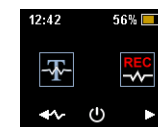

### Ruční spuštění

Pro ruční zahájení záznamu stiskněte tlačítko Start (⏻) a podržte je cca 2 sekundy stisknuté, dokud se nezapne displej a zobrazí se následující obrazovka.

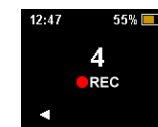

Po stisknutí tlačítka se šipkou vpravo (▶) se zahájí odpočet 5 až 0 a poté se spustí měření. Během záznamu svítí na displeji červená tečka.

## Ukončení záznamu

Zařízení ukončí měření automaticky, vy **nemusíte nic** dělat.

Ráno, po ukončení záznamu, uložte všechny díly zpět do pouzdra a odevzdejte celé pouzdro u lékaře.

**Důležité upozornění: Nosní kanylu vložte z hygienických důvodů nejdříve do samostatného sáčku!**