

Samoa

Polygraphiegerät. Smart, Simple & Small.

Grundgerät mit bereits angeschlossenem Brustgurt, welcher auch das Samoa am Körper befestigt, sowie einer bereits angeschlossenen Nasenkanüle.



- 1 Samoa mit Brustgurt
- 2 Nasenbrille
- 3 Bauchgurt
- 4 Fingersensor
- 5 Klettband für Fingersensor

Erfahren Sie mehr über Samoa:



© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein.

LÖWENSTEIN medical

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com

loewensteinmedical.com



 Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Deutschland



Kurzanleitung für Patienten

Samoa

Polygraphiegerät

**Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,**

Ihr Facharzt hat Ihnen ein Diagnosegerät zur Abklärung einer eventuell bestehenden Schlaf-Atemstörung mit nach Hause gegeben. Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen das Anlegen des Gerätes kurz erläutern. Das korrekte Anlegen des Samoa ist Voraussetzung für eine fehlerfreie Aufzeichnung.



Wie lege ich das Polygraphiegerät Samoa an?



1. Gerät mit Brustgurt über dem Unterhemd und unterhalb der Achseln anlegen. Das Samoa sollte fest, aber bequem anliegen, nur dann arbeiten die Sensoren zuverlässig.




2. Den Bauchgurt in Hüfthöhe anlegen. Der Drucksensor muss sich auf der Gurtinnenseite befinden.



3. Den schwarzen Anschluss des Bauchgurtes an den schwarzen Stutzen auf der Unterseite des Gerätes, mit circa einer halben Umdrehung, aufschrauben.



4. Legen Sie den Fingersensor am besten am Ringfinger an, möglichst vorher Fingernagel kurz schneiden und eventuell Nagellack entfernen. Finger in die graue Sensorhülle stecken, so dass das Kabel über dem Handrücken verläuft. Das Kabel mit dem Klettband am Handgelenk fixieren.

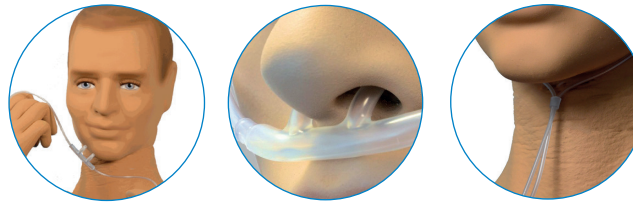


5. Legen Sie nun die Nasenbrille an, indem Sie die Kanülen in den Nasenöffnungen platzieren. Die Schläuche werden hinter den Ohrmuscheln entlang unter das Kinn geführt und mit dem Kunststoffring fixiert.



6. Sofern die Nasenkanüle noch nicht angeschlossen ist: Die Nasenkanüle an der Unterseite des Gerätes auf den freien weißen Stutzen aufschrauben.

Therapiekontrolle


Bei Therapiekontrollen den T-Adapter zwischen Schlauch und Maske befestigen. Schlauch des T-Adapters an der Unterseite des Gerätes auf den freien weißen Stutzen aufschrauben. **Die Nasenkanüle entfällt!**

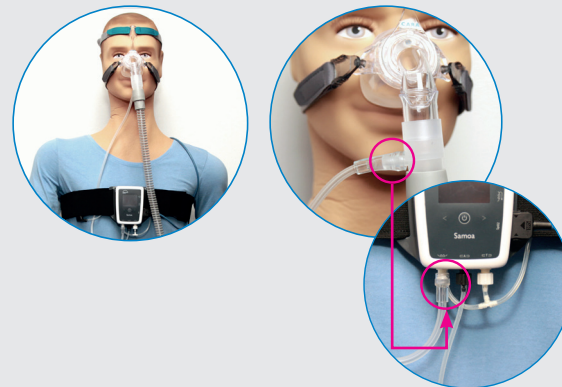

Aufzeichnung starten


Automatischer Start

Die Aufzeichnung beginnt und endet automatisch zu den in der Praxis festgelegten Zeitpunkten.

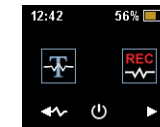

Manueller Start

Um eine Aufzeichnung manuell zu starten, drücken Sie die Starttaste (⏻) für ca. 2 Sekunden bis das Display sich einschaltet und der folgende Bildschirm erscheint.

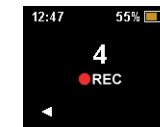

Sie drücken die Pfeiltaste rechts (➤) und die Messung startet nachdem der Countdown von 5 auf 0 runtergezählt ist. Während der Aufzeichnung leuchtet im Display ein roter Punkt.

Aufzeichnung beenden

Das Gerät beendet die Messung automatisch, Sie müssen **nichts** unternehmen.

Bitte legen Sie am nächsten Morgen, nach Beendigung der Aufzeichnung, alle Teile zurück in die Tasche und geben die komplette Tasche in der Praxis ab.

Wichtig: Nasenkanüle aus hygienischen Gründen vorher in eine separate Tüte stecken!