

Samoa

Polígrafo.

Inteligente, sencillo y compacto.

Equipo básico con cánula nasal y correa para el pecho preconnectados. Este último sirve además para fijar Samoa al cuerpo.



- 1 Samoa con correa para el pecho
- 2 Cánula nasal
- 3 Correa abdominal
- 4 Sensor para el dedo
- 5 Cinta adhesiva para el sensor para el dedo

Descubra más sobre Samoa:



LÖWENSTEIN
medical

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Alemania



Guía breve para pacientes

Samoa

Polígrafo

Estimada paciente,
estimado paciente:

Su médico especialista le ha proporcionado un aparato diagnóstico para detectar un posible trastorno respiratorio del sueño que debe usar en su domicilio. En esta guía le explicamos brevemente cómo debe colocar el equipo. La correcta colocación de Samoa es un requisito imprescindible para evitar errores en el registro.



© Protegido por derechos de autor. Reproducción de cualquier tipo únicamente con autorización expresa de Löwenstein.

¿Cómo coloco el polígrafo Samoa?



1. Coloque el equipo con la correa para el pecho sobre la camiseta y por debajo de las axilas. Samoa debe estar firmemente ajustado, pero sin causar molestias. Solo así los sensores funcionarán de manera fiable.




2. Coloque la correa abdominal a la altura de la cadera. El sensor de presión debe hallarse en la parte interior de la correa.



3. Enrosque la conexión negra de la correa abdominal a la toma negra en la parte inferior del equipo realizando aproximadamente medio giro.



4. Coloque el sensor para el dedo, a ser posible, en el dedo anular. Se recomienda cortar antes las uñas y eliminar el esmalte, si lo hubiera. Introduzca el dedo en la funda gris, de modo que el cable transcurra por el dorso de la mano. Fije el cable a la muñeca empleando la cinta adhesiva.

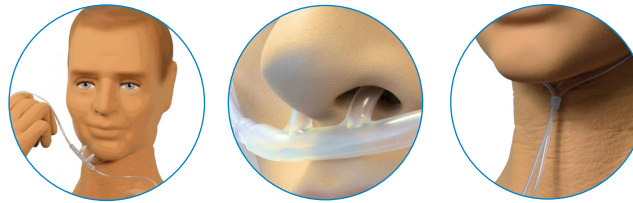

5. Coloque la cánula nasal situando las cánulas en los orificios de la nariz. Pase los conductos por detrás del pabellón auricular hacia debajo de la barbilla y fíjelos con la anilla de plástico.



6. Si la cánula nasal aún no está conectada: Enrosque la cánula nasal en la parte inferior del equipo a la toma blanca libre.

Control de la terapia


Para el control de la terapia, fije el adaptador en T entre el tubo y la mascarilla. Enrosque el tubo del adaptador en T en la parte inferior del equipo a la toma blanca. ¡La cánula nasal se omite!



Iniciar el registro


Inicio automático

El registro se inicia y finaliza de forma automática a las horas definidas en la consulta.

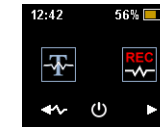

Inicio manual

Para iniciar manualmente el registro, pulse la tecla de inicio (⏻) durante aprox. 2 segundos hasta que la pantalla se encienda y aparezca la siguiente imagen.

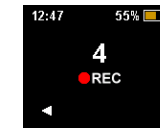

Al pulsar la tecla de flecha a la derecha (➡), la medición se inicia después de una cuenta atrás de 5 a 0. Durante el registro, se ilumina un punto rojo en la pantalla.

Finalizar el registro

El equipo finaliza la medición de forma automática. No debe realizar **ninguna acción**.

A la mañana siguiente y una vez finalizado el registro, coloque de nuevo todas las piezas en la bolsa y devuelva la bolsa con todo el contenido a la consulta.

Nota importante: ¡Por razones de higiene, introduzca previamente la cánula nasal en una bolsa aparte!