

# Samoa

Equipamento de poligrafia.  
Smart, Simple & Small.

Dispositivo base com cinta peitoral, para prender o Samoa ao corpo, e uma cânula nasal.



- 1 Samoa com cinta peitoral
- 2 Cânula nasal
- 3 Cinta abdominal
- 4 Sensor de dedo
- 5 Fita de velcro para o sensor de dedo

Saiba mais sobre o Samoa:



LÖWENSTEIN  
medical

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Alemanha  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH  
Daimlerstr. 23  
72414 Rangendingen, Alemanha



Guia rápido para o paciente

# Samoa

Equipamento de poligrafia

Estimada paciente,  
Estimado paciente,

O seu médico especialista deu-lhe um dispositivo de diagnóstico para levar consigo para casa, com a finalidade de esclarecer se sofre de um distúrbio respiratório do sono.

Com este guia rápido, pretendemos explicar de forma prática como colocar e utilizar o dispositivo. A colocação correta do Samoa é uma condição prévia para que possa ser obtido um registo sem erros.



© Protegido por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução apenas permitido com a autorização expressa da Löwenstein.

## Como colocar o polígrafo Samoa?



1. Coloque o dispositivo com a cinta peitoral sobre a camisola e sob as axilas. O Samoa deve ficar com um ajuste firme, mas confortável. Só assim é possível garantir que os sensores funcionam de forma fiável.




2. Coloque a cinta abdominal à altura da anca. O sensor de tensão tem de ficar no lado interior da cinta.



3. Enrosque, em aproximadamente meia volta, a conexão preta da cinta abdominal no bocal preto, na parte inferior do dispositivo.



4. De preferência, coloque o sensor de dedo no dedo anelar. Se possível, corte a unha e retire o verniz das unhas antes de colocar o sensor. Introduza o dedo no sensor, de modo que o cabo passe sobre as costas da mão. Prenda o cabo ao pulso com a fita de velcro.

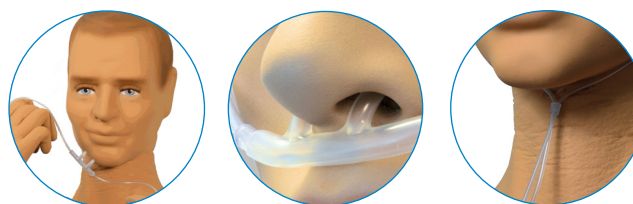


5. Agora, coloque a cânula nasal, posicionando as cânulas nas aberturas nasais. Os tubos devem ficar posicionados por trás das aurículas, sob o queixo, e ser fixados com o anel de plástico.



6. Se a cânula nasal ainda não estiver aplicada: enrosque a cânula nasal no bocal branco livre, na parte inferior do dispositivo.

## Controlo da terapia


Para controlos da terapia, coloque o adaptador em T entre o circuito e a máscara. Enrosque o tubo do adaptador em T no bocal branco livre, na parte inferior do dispositivo. **A cânula nasal já não é necessária!**

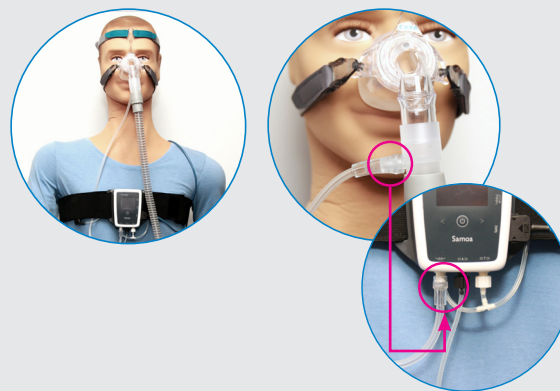

## Iniciar o registo


### Início automático

O registo começa e termina automaticamente nas horas especificadas no estabelecimento de saúde.

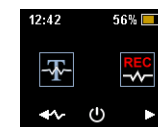

### Início manual

Para iniciar um registo manualmente, prima o botão "Iniciar" (power icon) durante aprox. 2 segundos até o ecrã ligar e exibir o seguinte.

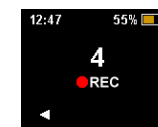

Prima o botão de seta para a direita (right arrow) e a medição é iniciada após uma contagem decrescente de 5 para 0. Durante o registo, é exibido um ponto vermelho no ecrã.

## Terminar o registo

O dispositivo termina a medição automaticamente, não precisa de fazer **nada**.

Na manhã seguinte, depois de terminada a gravação, volte a colocar todos os componentes na bolsa e devolva-a ao estabelecimento de saúde.

**Importante: por razões de higiene, colocar previamente a cânula nasal num saco separado!**