

## Stručný návod offline měření – inicializace

# Samoa

## Polygraf



### 1. Příprava

Přístroj Samoa spojte prostřednictvím připojovacího kabelu USB s počítačem.




### 2. Zahájení nahrávání


#### 2.1



Dvojitým kliknutím na symbol **MSV** na pracovní ploše otevřete software prohlížeče MiniScreen Viewer.

#### 2.2

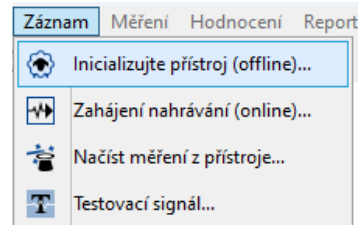

Vyberte možnost **Záznam > Inicializujte přístroj (offline)** nebo klikněte na symbol  na panelu nabídek nebo na ovládacím panelu.

#### 2.3

Masku vyplňte základními údaji pacienta. Poté zvolte možnost **Start přenosu**.

#### 2.4

Naváže se spojení s přístrojem Samoa.

#### 2.5

#### 2.6

Případně zvolte nové nastavení kanálů (**Načíst nastavení kanálů**).

Ze seznamu vyberte požadované nastavení kanálů.

#### 2.7


Zařízení lze inicializovat pro **automatické** (naprogramované) nebo **ruční** spuštění.

**Naprogramovaný start:** pokračujte bodem **2.8.1**

**Ruční start:** pokračujte bodem **2.9.1**


## 2.8. Naprogramovaný start

### 2.8.1

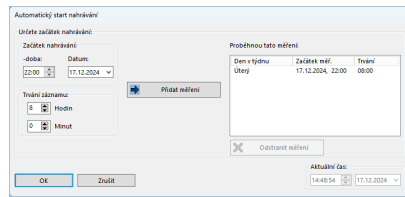

Určete začátek nahrávání a –dobu a poté klikněte na **Přidat měření**. Naprogramované měření se zobrazí v okně vpravo. Potvrďte tlačítkem **OK**.


### 2.8.2

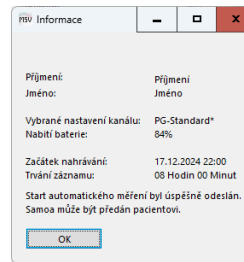

Zobrazí se následující kontrolní hlášení. Potvrďte tlačítkem **OK**. V naprogramovaný okamžik přístroj automaticky zahájí měření.


## 2.9. Ruční spuštění

### 2.9.1

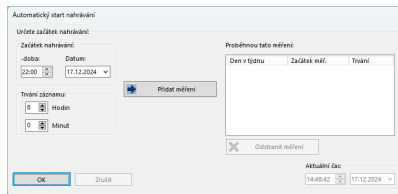

Potvrďte dialogové okno tlačítkem **OK**.


### 2.9.2

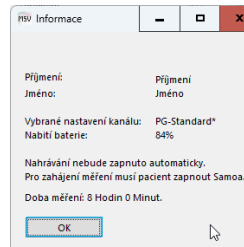


Zobrazí se následující kontrolní hlášení. Hlášení potvrďte tlačítkem **OK**.

### 2.9.3

#### Akce pacienta ke spuštění ručního měření

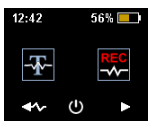

K ručnímu spuštění měření zapne pacient přístroj Samoa ve vhodný okamžik stisknutím tlačítka Zap/Vyp (2 sekundy).

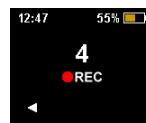



Pacient nyní může spustit ruční měření stisknutím tlačítka se šipkou vpravo. Měření začne, jakmile odpočítávání klesne na nulu. Probíhající měření je na displeji indikováno červeným bodem.

## 3. Načtení měření


Připojovacím kabelem USB spojte přístroj Samoa s počítačem – viz **1. Příprava**

### 3.1

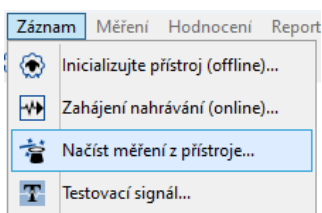

V nabídce zvolte možnost **Záznam > Načíst měření z přístroje** nebo klikněte na symbol  na panelu nabídek nebo na ovládacím panelu.

### 3.2

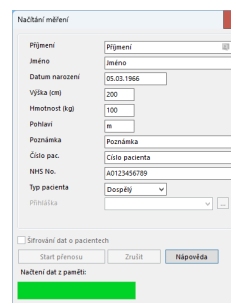

Načtou se data z paměti.

Made in  
Germany

Dr. Fenyves und Gut Deutschland  
Daimlerstraße 23  
72414 Rangendingen, Německo

**Prodej + servis**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Strasse 80  
56130 Bad Ems, Německo  
T.: +49 2603 9600-0  
F.: +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com

