

Samoa

Polygraphe



1. Préparation

Reliez Samoa à l'ordinateur par câble USB.




2. Démarrer l'enregistrement


2.1



Ouvrez le logiciel MiniScreen Viewer en double-cliquant sur l'icône **MSV** du bureau

2.2

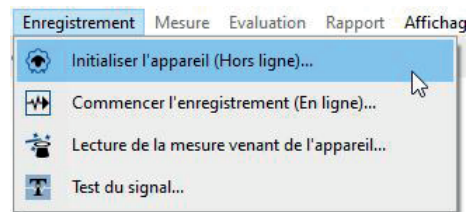


Sélectionnez **Enregistrement > Initialiser l'appareil (Hors ligne)** ou cliquez sur l'icône  dans la barre des menus ou sur le tableau de bord.

2.3

Renseignez les données du patient dans le masque. Sélectionnez ensuite **Démarrer Transfert**.

2.4

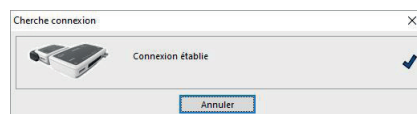


La connexion à Samoa est établie.

2.5


Sélectionnez si nécessaire de nouveaux canaux (**Ouvrir canaux**).

2.6

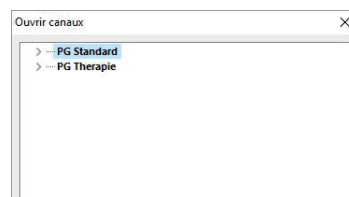

Sélectionnez les canaux souhaités dans la liste.

2.7

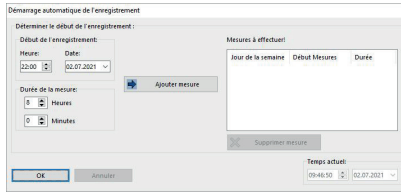


Vous pouvez initialiser l'appareil pour le démarrage **automatique** (programmé) ou **manuel**.

Démarrage programmé : passer au point **2.8.1**

Démarrage manuel : passer au point **2.9.1**


2.8. Démarrage programmé

2.8.1

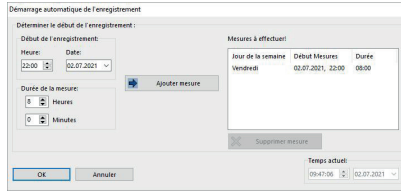

Définissez le début et la durée de l'enregistrement, puis cliquez sur **Ajouter mesure**. La mesure programmée apparaît dans la fenêtre de droite. Confirmez avec **OK**.


2.8.2

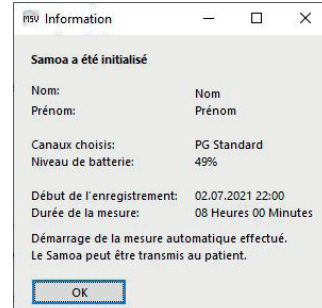

La fenêtre d'information suivante apparaît. Confirmez avec **OK**. L'appareil lance la mesure automatiquement à la date et à l'heure programmées.


2.9. Démarrage manuel

2.9.1

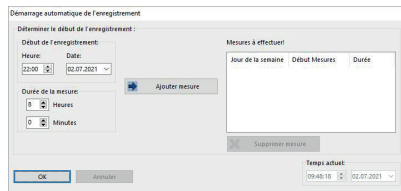

Confirmez la boîte de dialogue avec **OK**.


2.9.2

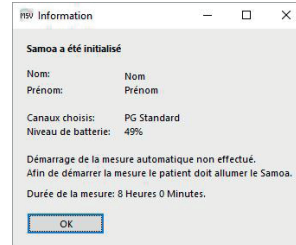


La fenêtre d'information suivante apparaît. Confirmez-la avec **OK**.

2.9.3

Opération à effectuer par le patient pour démarrer la mesure manuelle

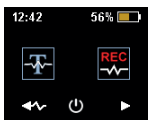

Pour démarrer la mesure manuellement, le patient doit allumer Samoa au moment voulu en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (pendant 2 secondes).

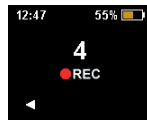



Le patient peut maintenant démarrer la mesure manuelle avec les touches fléchées à droite. La mesure commence dès que le compte à rebours arrive à 0. Lorsqu'une mesure est en cours, un point rouge s'affiche à l'écran.

3. Lire la mesure


Reliez Samoa à l'ordinateur par câble USB – voir **1. Préparation**

3.1

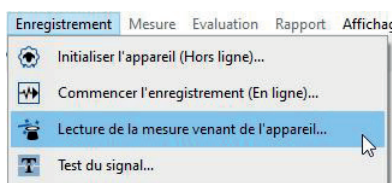

Sélectionnez **Enregistrement > Lecture de la mesure venant de l'appareil...** ou cliquez sur l'icône  dans la barre des menus ou sur le tableau de bord.

3.2

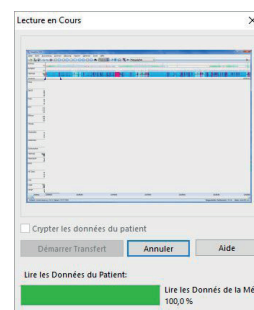

La lecture des données de la mémoire commence.



 Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Allemagne

Löwenstein Medical
6, Rue de l'Aulnay-Dracourt
91300 Massy, France
T. +33 1693553-20
france@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
T. +49 2603 9600-930
F. +49 2603 9600-40
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com

