

Samoa

Equipamento de poligrafia



1. Preparação

Conecte o Samoa ao PC via cabo USB.




2. Iniciar a gravação


2.1




Abra o software MiniScreen Viewer clicando duas vezes no símbolo **MSV** no ambiente de trabalho

2.2

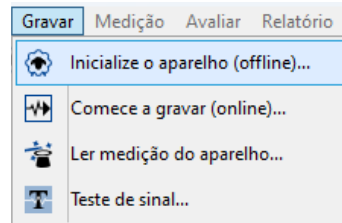


Selecione em **Gravar > Inicialize o aparelho (offline)** ou clique no símbolo  na barra de menu ou no dashboard.

2.3

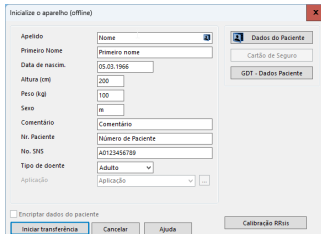


Preencha a máscara com os dados mestre do paciente. Em seguida, selecione **Iniciar transferência**.

2.4

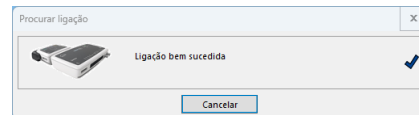


A ligação ao Samoa é estabelecida.

2.5

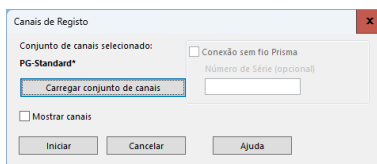


Se necessário, selecione um novo conjunto de canais (**Carregar conjunto de canais**).

2.6

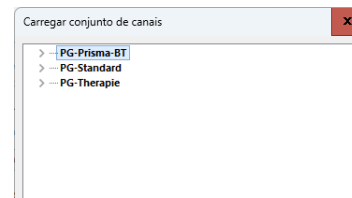

Selecione o conjunto de canais desejado a partir da lista.

2.7

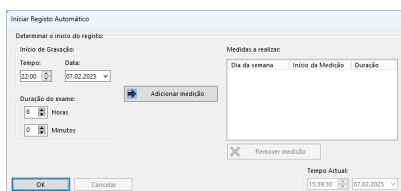


Tem a possibilidade de optar por uma inicialização **automática** (programada) ou **manual** do aparelho.

Inicialização programada: continuar com **2.8.1**

Inicialização manual: continuar com **2.9.1**


2.8. Inicialização programada

2.8.1

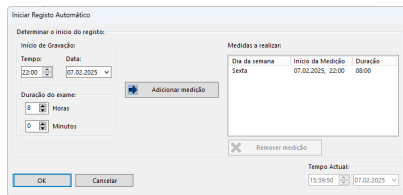

Defina o início e a duração da gravação e, em seguida, clique em **Adicionar medição**. Na janela direita, é exibida a medição programada. Confirmar com **OK**.


2.8.2

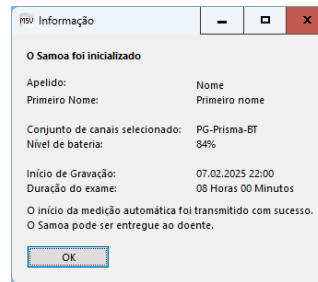

É exibida a seguinte mensagem para o controlo. Confirmar com **OK**. O aparelho inicia automaticamente a medição à hora programada.


2.9. Inicialização manual

2.9.1

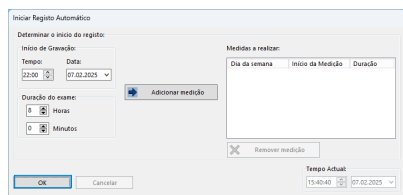

Confirmar o diálogo com **OK**.


2.9.2

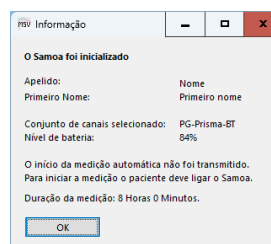


É exibida a seguinte mensagem para o controlo. Confirmar com **OK**.

2.9.3

Ação do paciente para a inicialização da medição manual

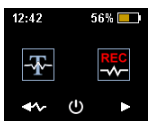

Para iniciar a medição manual, o paciente ativa o Samoa na hora correspondente, premindo o botão Lig./Desl. (2 segundos).

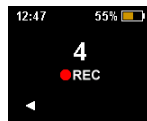



O paciente pode agora iniciar a medição manual, premindo os botões de seta para a direita. A medição é iniciada quando a contagem decrescente atinge 0. Uma medição em curso é identificada por um ponto vermelho no ecrã.

3. Ler a medição


Conecte o Samoa ao PC via cabo USB. — ver **1. Preparação**

3.1

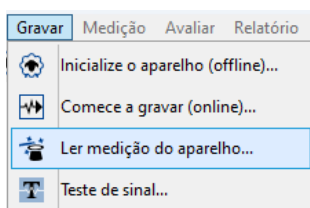

Selecione em **Gravar > Ler medição do aparelho** ou clique no símbolo  na barra de menu ou no dashboard.

3.2

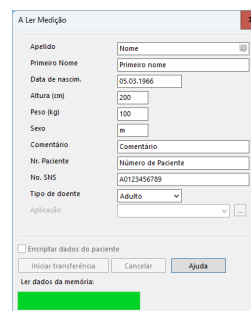

Os dados são lidos a partir da memória.

Made in
Germany

Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Alemanha

Distribuição + Assistência

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemanha
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



 With people in mind

