

Guide rapide pour la mesure hors ligne – Initialisation

Scala

Polygraphe



1. Préparation

Connectez Scala au PC par l'intermédiaire d'un câble USB.




2. Démarrer l'enregistrement


2.1



Ouvrez le logiciel MiniScreen Viewer en double-cliquant sur l'icône **MSV** du bureau.

2.2

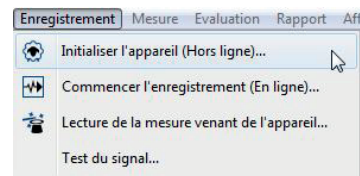


Sélectionnez **Enregistrement > Initialiser l'appareil (hors ligne)** ou cliquez sur l'icône  dans la barre des menus ou sur la page d'accueil.

2.3

Renseignez les données du patient dans la fenêtre. Sélectionnez ensuite **Démarrer Transfert**.

2.4

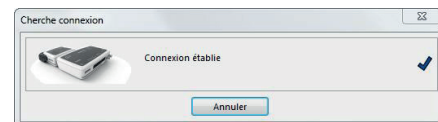


La connexion à Scala est établie.

2.5

Sélectionnez si nécessaire de nouveaux canaux (**Ouvrir canaux**).

2.6

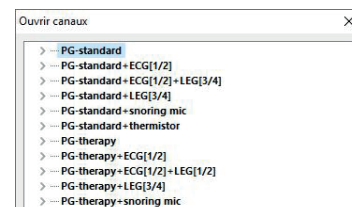

Sélectionnez les canaux souhaités dans la liste.

2.7


Vous pouvez initialiser l'appareil pour le démarrage **automatique** (programmé) ou **manuel**.

Démarrage programmé : passer au point **2.8.1**

Démarrage manuel : passer au point **2.9.1**


2.8. Démarrage programmé

2.8.1

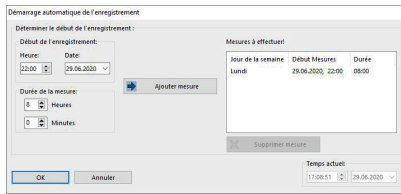

Définissez le début et la durée de l'enregistrement, puis cliquez sur **Ajouter mesure**. La mesure programmée apparaît dans la fenêtre de droite. Confirmez avec **OK**.


2.8.2

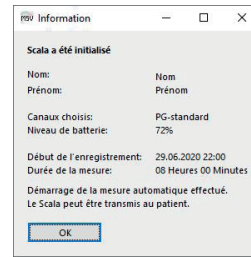

La fenêtre d'information suivante apparaît. Confirmez avec **OK**. L'appareil lance la mesure automatiquement à la date et à l'heure programmées.


2.9. Démarrage manuel

2.9.1

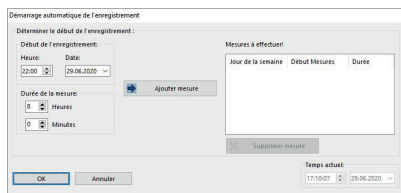


Confirmez la boîte de dialogue avec **OK**.

2.9.2

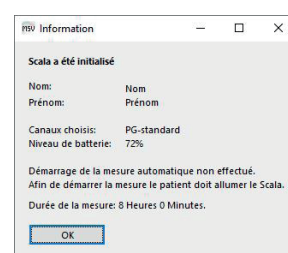

La fenêtre d'information suivante apparaît. Confirmez-la avec **OK**.

2.9.3 Opération à effectuer par le patient pour démarrer la mesure manuelle

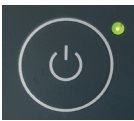


Pour démarrer la mesure manuellement, le patient doit allumer Scala au moment voulu en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (pendant 2 secondes). Pour indiquer qu'une mesure est en cours, la DEL verte clignote toutes les 4 secondes.


3. Lire la mesure


Connectez Scala au PC par l'intermédiaire d'un câble USB – voir **1. Préparation**.

3.1

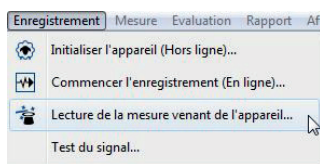

3.2

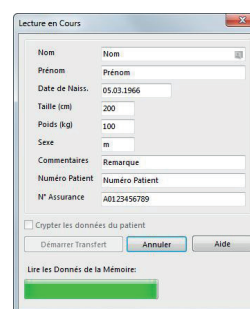

Sélectionnez **Enregistrement > Lecture de la mesure venant de l'appareil...** ou cliquez sur l'icône  dans la barre des menus ou sur la page d'accueil.

Le transfert des données de la mémoire commence.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Allemagne

Distribution + Service après-vente

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
T. +49 2603 9600-0
F. : +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

