

Guida breve misurazione offline - Inizializzazione

Scala

Apparecchio poligrafico



1. Preparazione

Collegare Scala al PC utilizzando il cavo di connessione USB.




2. Avvio di una nuova registrazione

2.1



Aprire il software MiniScreen Viewer con un doppio clic sul simbolo **MSV** sul desktop.

2.2

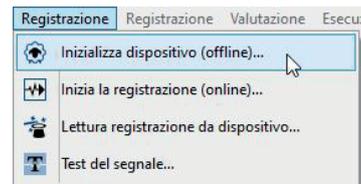


Selezionare **Registrazione > Inizializza dispositivo (offline)** o fare clic sul simbolo  nella barra dei menu o sul dashboard.

2.3

Inizializza dispositivo (offline)
 Cognome: [Nome] Nome: [Nome] Schede assicurazione: []
 Data di nascita: [05.03.1966] Data di nascita: [] Schede assicurazione: []
 Altezza (cm): [180] Altezza (cm): [] Schede assicurazione: []
 Peso (kg): [70] Peso (kg): [] Schede assicurazione: []
 Sesso: [M] Sesso: [] Schede assicurazione: []
 Commento 1: [] Commento: [] Schede assicurazione: []
 Breve numero: [] Breve numero: [] Schede assicurazione: []
 Assicurazione n.: [40723456789] Assicurazione n.: [] Schede assicurazione: []
 Tipo di paziente: [Adulto] Tipo di paziente: [] Schede assicurazione: []
 Cripta i dati del paziente.
 Inizia trasferimento Annulla ? Calibrazione P8bis

Compilare la maschera con i dati del paziente. Selezionare quindi **Inizia trasferimento**.

2.4

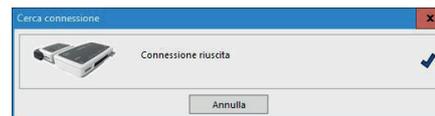

Viene effettuata la connessione a Scala.

2.5

Canali di registrazione
 Impostazione dei canali selezionata:
PG-Standard*
 Carica impostazione canale
 Mostra i canali
 OK Annulla ?

Selezionare eventualmente una nuova impostazione dei canali (**Carica impostazione canale**).

2.6



Selezionare l'impostazione dei canali desiderata dall'elenco.

2.7

Avvio automatico registrazione
 Determinare l'inizio della registrazione:
 Inizio della registrazione:
 Ora: [22:00] Data: [01.07.2022]
 Durata della registrazione:
 [5] Ore [0] Minuti
 Aggiungi registrazione
 Registrazioni da valutare:
 Giorni della settimana Inizio registrazione Durata
 Esegui registrazione
 OK Annulla ? Ora reale: [06.46.09] [01.07.2022]


È possibile inizializzare il dispositivo per un avvio **automatico** (programmato) o **manuale**.

Avvio programmato: passare al **2.8.1**

Avvio manuale: passare al **2.9.1**


2.8. Avvio programmato

2.8.1

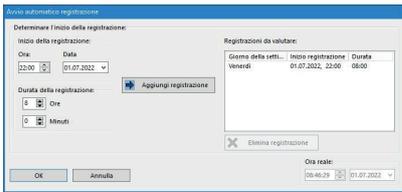

Determinare l'inizio della registrazione e la durata e quindi fare clic su **Aggiungi registrazione**. Nella finestra sulla destra viene visualizzata la misurazione programmata. Confermare con **OK**.


2.8.2

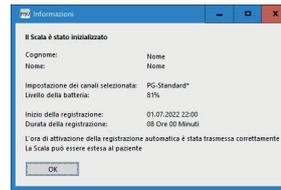

Compare il messaggio seguente per un controllo. Confermare con **OK**. L'apparecchio avvierà la registrazione automatica nel momento programmato.


2.9. Avvio manuale

2.9.1

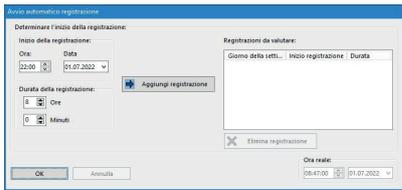

Confermare la finestra di dialogo con **OK**.

2.9.2

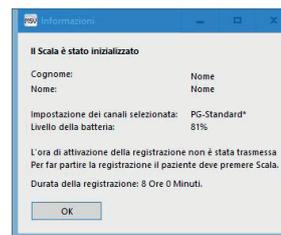

Compare il messaggio seguente per un controllo. Confermare con **OK**.

2.9.3 Avvio della misurazione manuale da parte del paziente




Per avviare la misurazione manuale il paziente accende Scala al momento opportuno tenendo premuto il tasto on/off (2 secondi). Una registrazione in corso è contrassegnata da un LED verde che lampeggia ogni 4 secondi.

3. Lettura della registrazione


Collegare Scala al PC utilizzando il cavo di connessione USB – vedi. **1. Preparazione**.

3.1

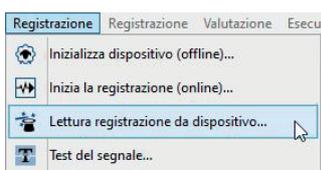

Selezionare **Registrazione > Lettura registrazione da dispositivo** o fare clic sul simbolo  nella barra dei menu o sul dashboard.

3.2

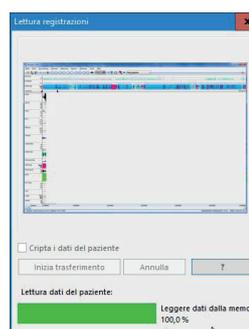

I dati vengono letti dalla memoria.




Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Germania

Distribuzione + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Germania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

