

Sonata

Polisonnografia



1. Preparazione

Utilizzare il cavo di collegamento USB per connettere Sonata al PC.




2. Avviamento della registrazione


2.1




Aprire il software MiniScreen Viewer facendo doppio clic sull'icona **MSV** sul desktop.

2.2

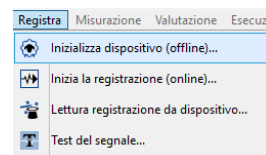


Selezionare **Registra > Inizializza dispositivo (offline)** o fare clic sull'icona  nella barra del menu o sul pannello di controllo.

2.3

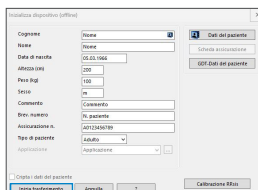


Compilare la maschera con i dati anagrafici del paziente. Selezionare infine **Inizia trasferimento**.

2.4

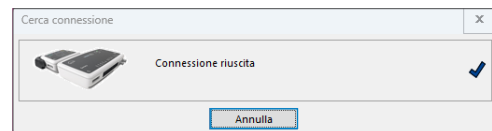


La connessione a Sonata viene stabilita.

2.5

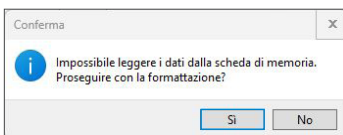


Attenzione! Accertarsi che tutti i dati del dispositivo siano stati letti. Confermare questo messaggio con **Si**.

2.6

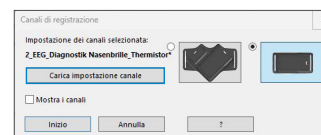


Selezionare se necessario una nuova impostazione dei canali (**Carica impostazione canale**).

2.7

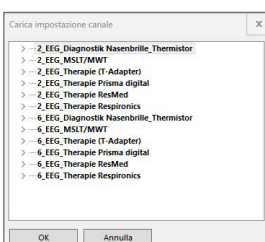

Selezionare l'impostazione canale desiderata dall'elenco.

2.8

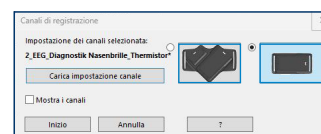


Selezionare l'orientamento desiderato per il supporto del modulo principale e neurologico (a V oppure orizzontale).

2.9.

È possibile inizializzare il dispositivo per un avvio **automatico** (programmato) o **manuale**.


Avvio programmato: passare a **2.10.1**.

Avvio manuale: passare a **2.11.1**.

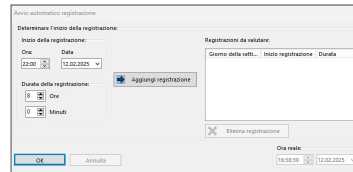


2.10. Avvio programmato

2.10.1

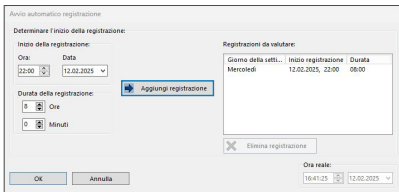

Determinare l'inizio e la durata della registrazione e in seguito fare clic su **Aggiungi registrazione**. Nella finestra a destra compare la registrazione programmata. Confermare con **OK**.


2.10.2

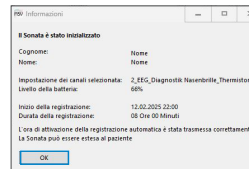

In questa finestra è possibile eseguire un controllo dei dati. Confermare con **OK**. Il dispositivo inizia la misurazione in modo automatico all'orario programmato.


2.11. Avvio manuale

2.11.1

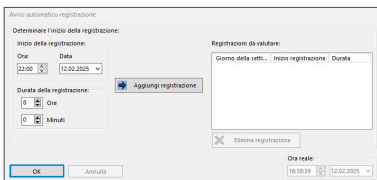


Confermare la finestra di dialogo con **OK**.

2.11.2

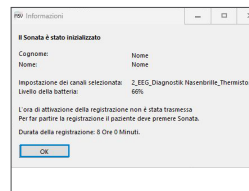

In questa finestra è possibile eseguire un controllo dei dati. Confermare con **OK**.

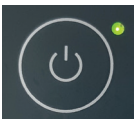



Per avviare la misurazione in modo manuale, il paziente attiva Sonata al momento specifico premendo per 2 secondi sul pulsante ON / OFF. Una luce LED verde lampeggiante ad intervalli di 4 secondi segnala che la misurazione è in corso.

3. Lettura registrazione


Utilizzare il cavo di collegamento USB per connettere Sonata al PC (vedere **1. Preparazione**).

3.1

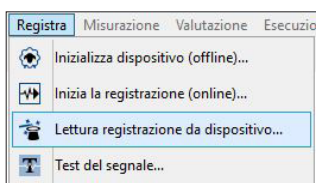

Selezionare **Registra > Lettura registrazione da dispositivo** o fare clic sull'icona  nella barra del menu o sul pannello di controllo.

3.2

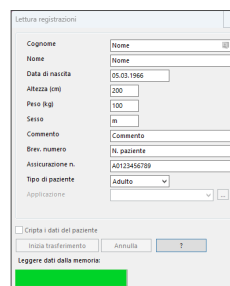

I dati vengono acquisiti dalla memoria.

Made in
Germany

Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Germania

Sede centrale
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Germania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



With people in mind

