


Sensorikanschlüsse

Sonata

Polysomnographiegerät




Applikationsvariante 1 – V-Form mit Nasenbrille/Termistor*

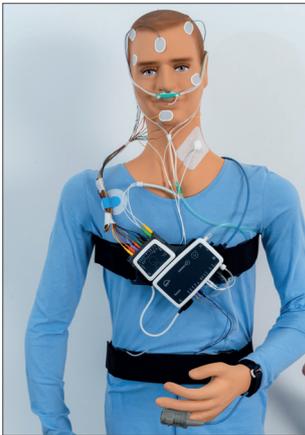

Verbindungskabel
Haupt- und Neuromodul

Applikationsvariante 2 – Getrennte Applikation mit T-Adapter*

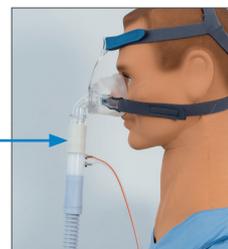

T-Adapter

*Beide Applikationsvarianten sind sowohl mit Nasenbrille/Thermistor als auch mit T-Adapter möglich.

Anschlüsse Hauptmodul



Anschluss für T-Adapter
oder Nasenbrille



Anschluss für Verbindungskabel
Haupt- und Neuromodul

	Verbindungskabel Haupt-/Neuromodul		Grundelektrode Achtung! Bei Verwendung des Neuromoduls den GND-Anschluss am Neuromodul verwenden und diesen am Hauptmodul frei lassen.		Abdomen
	Elektrodenanschluss Bein links 1				SpO₂ –Fingerclip (unterer, größerer Anschluss) IOIOIO – Anschluss Verbindungs- kabel zu PC/Netzwerk (oberer, kleinerer Anschluss)
	Elektrodenanschluss Bein links 2		Thermistor		Schwarze Schraubkappe des T-Adapters
	Elektrodenanschluss Bein rechts 1		Schnarchmikrofon		Nasenbrille oder weiße Schraub- kappe des T-Adapters
	Elektrodenanschluss Bein rechts 2		Thorax		



Neuromodul fertig verkabelt



Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

