

Samoa

Polygraphie zukunftsorientiert durchführen.

Das **Polygraphiegerät** Samoa zielt auf den standardisierten Einsatz im diagnostischen und therapeutischen Bereich und wirbt dabei nicht umsonst mit den Attributen **Smart, Simple & Small**.

Smart

Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht den kabellosen Datenaustausch mit den Schlaftherapiegeräten der neuesten Generation von Löwenstein. Die für die Therapiekontrolle oder Therapieeinstellung wichtigen Signale wie z.B. Flow, Druck, Leckage, Tidalvolumen werden aus dem Therapiegerät direkt an Samoa übertragen. Diese Daten lassen sich aus Samoa zeitsynchron mit den polygraphischen Parametern wie Atmung, SpO₂, Puls, Lage auslesen und auf einem Computer darstellen.


Simple

Dank des integrierten Farbdisplays und der intuitiven Steck- und Anschlussmöglichkeiten für Sensoren ist die Bedienung fast selbsterklärend.

Small

Mit seinen kleinen Abmessungen und dem vergleichsweise geringen Gewicht bietet Samoa einen sehr angenehmen Tragekomfort.

Abgerundet wird der Leistungsumfang von Samoa durch die integrierte Möglichkeit auch mit einem Thermistor den Atemfluss zu registrieren und durch den wechselbaren Akku.

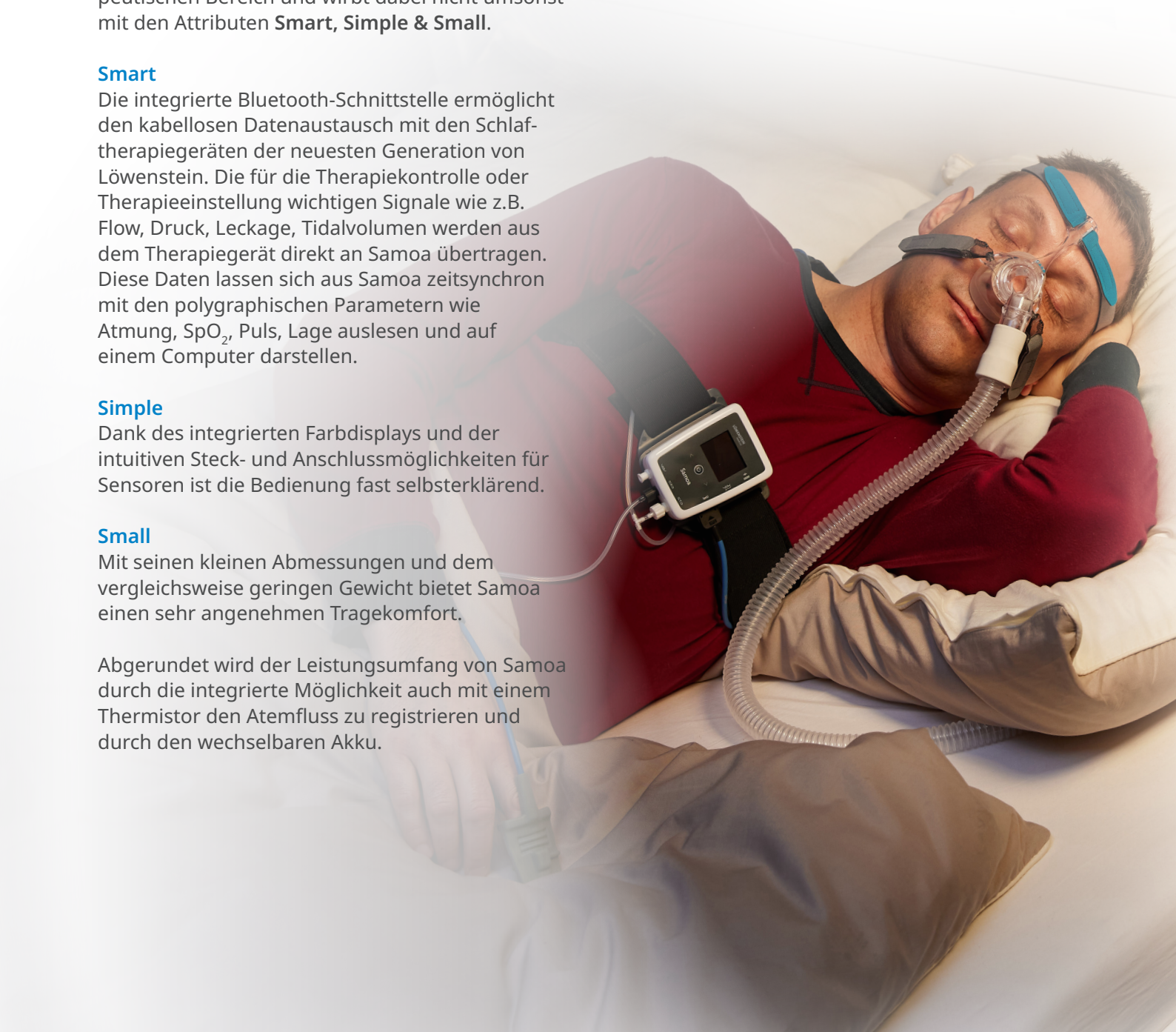

Samoa



Zubehör

	Artikelnummer		Artikelnummer
Staudruck-Nasenkanüle, 50 cm, LuerLock	200-0312/10	Klettband Arm	200-0311
Staudruckkanüle nasal/oral, 60 cm, LuerLock, kleiner Mundabgriff	500003	Thoraxsensor	929140
Staudruckkanüle nasal/oral, 60 cm, LuerLock, großer Mundabgriff	200-0312/15	Abdomensensor	925395
T-Adapter mit LuerLock, 80 cm	ta80	Thoraxgurt, Größe M, schwarz	926280
T-Adapter mit LuerLock, 200 cm	ta200	Abdomengurt, Größe M, schwarz	925389
SpO ₂ Softclip-Fingersensor	930300	Akku für Samoa	929180
Thermistor	929320	Akkudeckel für Samoa	929124
		Ladeschale für Samoa Akku	929181

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H):	90 mm x 66 mm x 29 mm
Gewicht:	135 g inklusive Akku
Gehäuse:	ABS, UL 94HB
Speichermedium:	Interne SD Karte
Speicherkapazität:	Mind. 100 Std.
Fehleranzeige:	Display / LED an der Gehäuseoberseite
Datenübertragung:	USB-Schnittstelle mit Kabel zur Datenübertragung
Spannungsversorgung:	Wiederaufladbarer Li-Ion Akku 3.6 V mit Lade-Elektronik und Schutzschaltung
Wartung und Service:	Wartungs- und servicefrei
Updates Software:	Lebenslange kostenfreie Softwareupdates für unsere Analyse und Auswertesoftware
Lizensierung Software:	Keine Softwarelizenzierung notwendig

Gerätebezeichnung

Artikelnummer

Samoa	929020
-------	--------

CE 0483



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

