

LÖWENSTEIN
medical

JOYCEclinic Full Face

Mascarilla de uso individual

 With people in mind

JOYCEclinic Full Face Simplemente sin concesiones.

Con nuestra mascarilla nasal y oronasal de uso individual para la ventilación aguda no invasiva, disfrutará de la buena calidad habitual de Löwenstein Medical.

JOYCEclinic Full Face permite simultáneamente adaptar la mascarilla de forma rápida y sencilla, y ajustarla segura y cómodamente; incluso con presiones de hasta 50 cmH₂O.

Las cintas para la cabeza, que se mantienen estables incluso con presiones elevadas, se pueden desconectar de forma rápida y sencilla a través de la cuerda de apertura claramente reconocible.

Gracias al uso individual del paciente se evitan las contaminaciones cruzadas.

Esto significa que no tendrá que hacer concesiones en la clínica, a pesar de la presión de los costes.

- Prevención de la contaminación cruzada
- Reborde de la mascarilla y cintas estables frente a la presión
- Cuerda de apertura

Con la ayuda de 4 codos intercambiables encontrará la variante de mascarilla adecuada para cada situación y combinación de dispositivos.

JOYCEclinic Full Face está disponible en 3 tamaños en las variantes non-vented, non-vented con AAV y vented con AAV. Con la plantilla de ajuste se puede determinar el tamaño de forma segura y rápida, incluso sin tocar la mascarilla gracias a la bolsa de dos compartimentos.

El codo para endoscopia disponible como práctico accesorio permite realizar una broncoscopia sin necesidad de interrumpir la ventilación.

Los codos NV, NV + AVV y Vented también están disponibles como repuestos de fácil sustitución.

Todas las mascarillas están disponibles además como un juego de 10 mascarillas sin bolsa de dos compartimentos. El juego incluye un manual de instrucciones y una plantilla de ajuste.

- 3 tamaños
- 4 codos intercambiables
- Plantilla de ajuste
- Bolsa de dos compartimentos
- Mascarilla individual o juego de 10 unidades



Codo

Gracias a una palanca en el anillo de seguridad, es posible liberar fácilmente y cambiar de forma rápida los ángulos en cualquier momento.



NV sin AAV*



NV con AAV*



V con AAV*



Codo para endoscopia

Codo articulado

Con la ayuda del codo articulado integrado en todas las variantes ventiladas también se puede utilizar un tubo CPAP.


Codo articulado




*AAV = válvula antiapnea (válvula de respiración de emergencia)

¿Qué codo debo usar y cuándo?


Codo NV

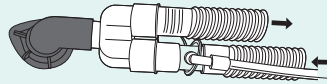

- Circuito de doble rama con inspiración y espiración separadas, así como una válvula de espiración en el dispositivo

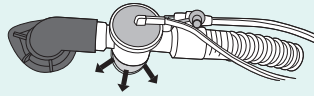


- Circuito con válvula de espiración cerca del paciente

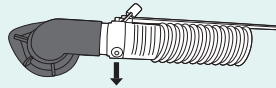


- Circuito con fuga

Codo NV y AAV

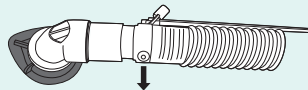


- Circuito con fuga y seguridad adicional en caso de fallo del dispositivo (válvula antiapnea [AAV])
- Combinación estándar para ventiladores con sistema de fugas

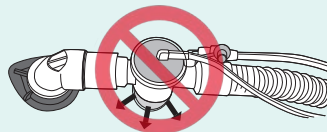

- El circuito con válvula espiratoria cerca del paciente no debe usarse.
- El flujo no es lo suficientemente alto como para mantener abierta la válvula de espiración de emergencia.

Codo vented

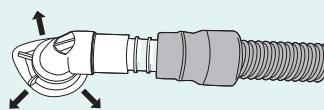

- Codo y circuito CPAP para el uso de ventiladores prisma VENT o similares

JOYCEclinic Full Face



Información sobre pedidos

Artículo,
1 unidad por cada unidad de embalaje

Número de artículo

JOYCEclinic Full Face NV

- Tamaño S
- Tamaño M
- Tamaño L

WM 26805
WM 26815
WM 26825

JOYCEclinic Full Face NV + AAV

- Tamaño S
- Tamaño M
- Tamaño L

WM 26845
WM 26855
WM 26865

JOYCEclinic Full Face vented

- Tamaño S
- Tamaño M
- Tamaño L

WM 26840
WM 26850
WM 26860

Artículo,
10 unidades por cada unidad de embalaje

Número de artículo

JOYCEclinic Full Face NV

- Tamaño S
- Tamaño M
- Tamaño L

WM 26857
WM 26858
WM 26859

JOYCEclinic Full Face NV + AAV

- Tamaño S
- Tamaño M
- Tamaño L

WM 26869
WM 26870
WM 26871

JOYCEclinic Full Face vented

- Tamaño S
- Tamaño M
- Tamaño L

WM 26866
WM 26867
WM 26868

Accesorios

Adaptador para endoscopia

WM 15864

Repuestos

Ángulo NV

WM 25269

Ángulo NV + AAV

WM 26834

Ángulo vented

WM 26833

Cintas para la cabeza JOYCEclinic Full Face (5 unidades) WM 26835

Adaptador de la articulación de giro* WM 26916

* incluido en el volumen de suministro de la versión vented

Datos técnicos

Clase de producto según la directiva 93 / 42 / CEE

Iia

Margen de presión de terapia

4 cmH₂O - 50 cmH₂O

Conexión de tubo flexible, cono según EN ISO 5356-1

22 mm (hembra)

Espacio muerto geométrico

tamaño S
tamaño M
tamaño L

225 ml
255 ml
305 ml

CE 0197




Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Alemania
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
loewensteinmedical.com

Ventas + servicio técnico

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

