


**LÖWENSTEIN**  
medical

**JULIA**

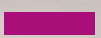

Mehr Raum für Träume.

### Keine Stirnstütze

- freies Sichtfeld
- Brille kann z.B. zum Lesen getragen werden

### Maskenkissen

- bewährte Passform von CARA in 3 Größen

### Ausatemsystem


- bewährt leise und diffus für ungestörten Tragekomfort

### Innovativer Kopfbügel

- komfortabler und stabiler Maskensitz während der ganzen Nacht
- einfaches Aufsetzen der Maske

### Nachhaltigkeit

- ressourcenschonende Herstellverfahren im Fokus

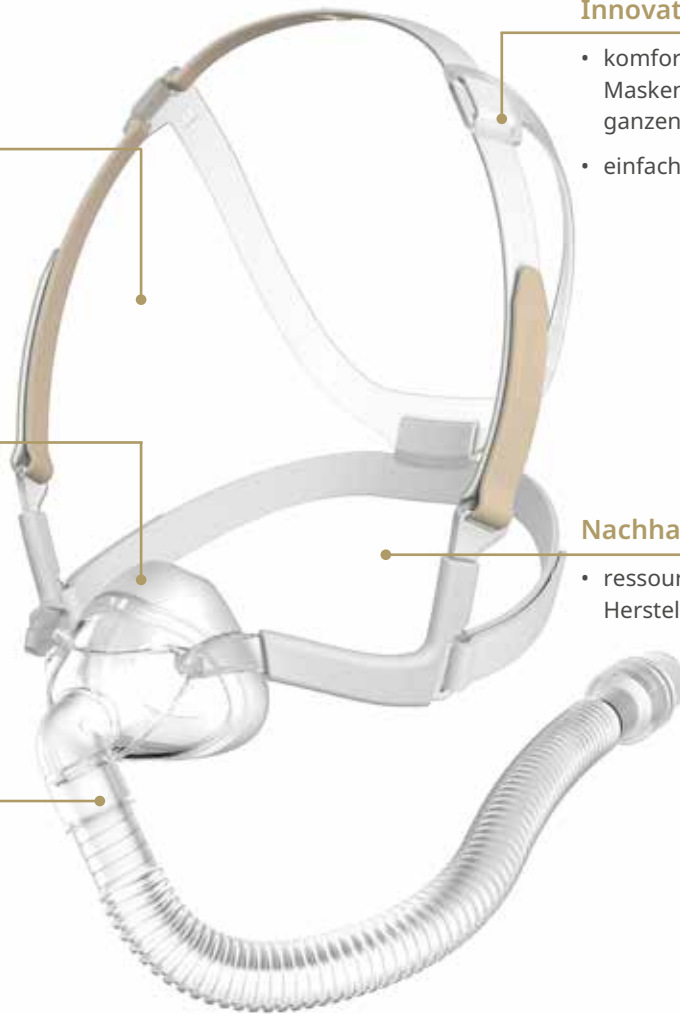

## JULIA, die neue Nasalmaske für Schlafapnoe-Patienten, steht für klein, kaum spürbar, freie Sicht und nachhaltig.

### Bewährtes neu gedacht.

JULIA hat die sehr gute Passform von CARA übernommen. Das Design des Maskenkissens schmiegt sich der kleinen Form von JULIA an und wirkt dadurch optisch noch kleiner.

Das Ausatemsystem entspricht dem Löwenstein Standard - leise und diffus.

### Maske und Brille.

Neben Bewährtem gibt es bei JULIA auch Neues. Sie bietet ein freies Sichtfeld ohne Stirnstütze. Die liebgewonnene abendliche Routine lesen oder fernsehen mit Brille und Maske kann beibehalten werden.

### Innovative Kopfbänderung.

Der stabile Maskensitz während des Schlafes ist das A und O. Einen wesentlichen Anteil hieran hat die Kopfbänderung. Insbesondere wenn die Maske ohne Stirnstütze auskommt. Dieses wird durch den Kopfbügel aus flexiblem, ergonomisch in 3D geformten Kunststoff gewährleistet.

Der stabile Kopfbügel hilft, die Kopfbänderung und Maske kinderleicht und verdrehsicher aufzusetzen. Zusätzlich gibt er dem Maskensystem den notwendigen Halt – in jeder Schlafposition.

# JULIA ist nicht nur nachhaltig, sondern auch „made in Germany“. Eine Maske mit Zukunft.

## Zukunft nachhaltig gestalten.

Etablierte und bewährte Produktionsprozesse müssen neu und nachhaltig gedacht werden, um zukunftsfähig zu bleiben.

## Ressourcenschonend verarbeiten.

Die konventionelle Herstellung von Textilien benötigt viel Wasser, Strom und Chemikalien. Der Färbeprozess wurde bei JULIA nachhaltig geändert: Farbpigmente werden bereits dem Rohstoff beigemischt, bevor es zu Garn verarbeitet wird.

Dadurch werden folgende Einsparungen erzielt<sup>1</sup>:



↓ -90 %  
Frischwasser



↓ -94 %  
Abwasser



↓ -66 %  
Energieverbrauch



↓ -70 %  
Chemikalien


<sup>1</sup> Vom Hersteller ermittelte Werte

## Nachwachsende Rohstoffe verwenden.

JULIAS Verpackungsbeutel besteht zu 80 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr.

## Recyclingfähig.

„Mehr Kreisverkehr, weniger Einbahn“, d.h. Rohstoffe so lang wie möglich im Wirtschaftskreislauf halten und Abfall vermeiden. JULIAS Maskenteile sind entsprechend konzipiert: Keine Vermischung von verschiedenen Materialien, um die Recyclingfähigkeit sicherzustellen.

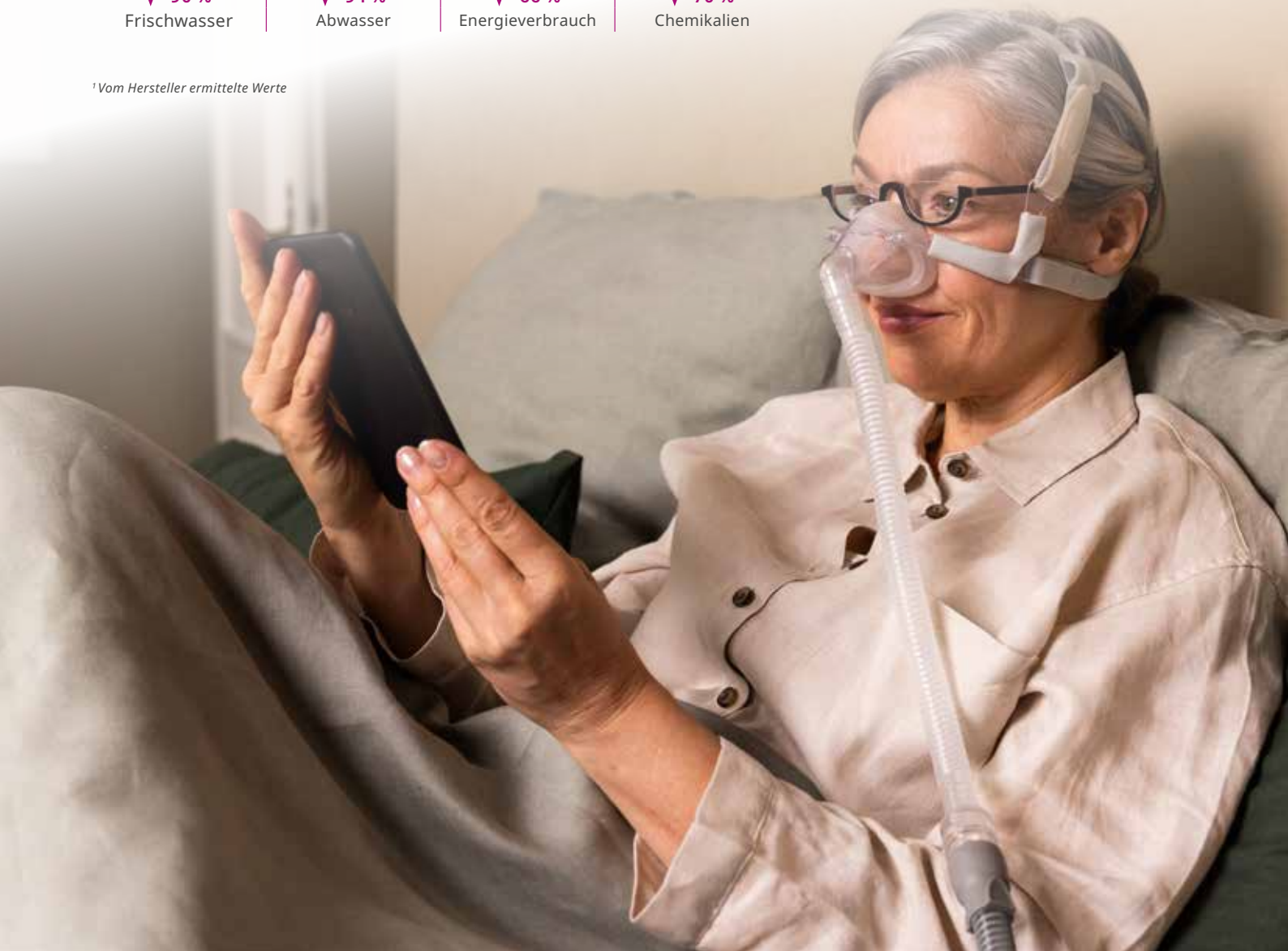

## Ersatzteile



**Kopfbänderung JULIA  
inkl. Bänderungsclips**  
small: LMT 26714  
standard: LMT 26795



**Bügelüberzug  
rechts und links**  
LMT 17823



**Maskenkissen JULIA**  
Gr. S: LMT 26636  
Gr. M: LMT 26637  
Gr. L: LMT 26638



**Maskenschlauch mit Adaptern**  
LMT 26713

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter [loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

## Technische Daten JULIA

Produktklasse nach Verordnung MDR (EU) 2017/745	II a	Therapiedruck	4 hPa – 30 hPa
Abmessungen (B x H x T)		Temperaturbereich	
• Größe S	50 x 61 x 75 mm	• Betrieb	+5 °C bis +40 °C
• Größe M	57 x 61 x 73 mm	• Transport und Lagerung	-20 °C bis +70 °C
• Größe L	63 x 65 x 73 mm		
Gewicht		Strömungswiderstand	
• Größe S	78 g	• bei 50 l/min	0,8 hPa
• Größe M	78 g	• bei 100 l/min	2,9 hPa
• Größe L	79 g		
Totraumvolumen		Angegebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871:	
• Größe S	65 ml	• Schalldruckpegel	18 dB(A)
• Größe M	71 ml	• Schalleistungspegel	26 dB(A)
• Größe L	87 ml	• Unsicherheitsfaktor	3 dB(A)
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)	Lebensdauer	5 Jahre
		Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate <sup>1</sup>
		Angewandte Normen	EN ISO 17510: 2020

<sup>1</sup> Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Reinigung und der verwendeten Reinigungsmittel, von der täglichen Tragedauer, vom Therapiedruck und von der individuellen Schweißsekretion. Die Nutzung des zweiten Maskenkissens (optional enthalten) verlängert nicht die Gebrauchsdauer.

## Gerätebezeichnung Gr. Artikel-Nr. HMV-Pos.-Nr.

CE 0197

JULIA	S	LMT 26710	beantragt
JULIA	M	LMT 26720	beantragt
JULIA	L	LMT 26730	beantragt
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	S	LMT 26710-1000*	beantragt
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	M	LMT 26720-1000*	beantragt
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	L	LMT 26730-1000*	beantragt

\* Maskenkissen derselben Größe im Lieferumfang enthalten



Gedruckt auf  
100 % recyceltem Papier



Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalsweg 40  
22525 Hamburg, Deutschland

**Vertrieb + Service**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Deutschland  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Menschen im Mittelpunkt**

