



**LÖWENSTEIN**  
medical

**JULIA**

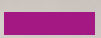

Plus de place pour les rêves.

 With people in mind

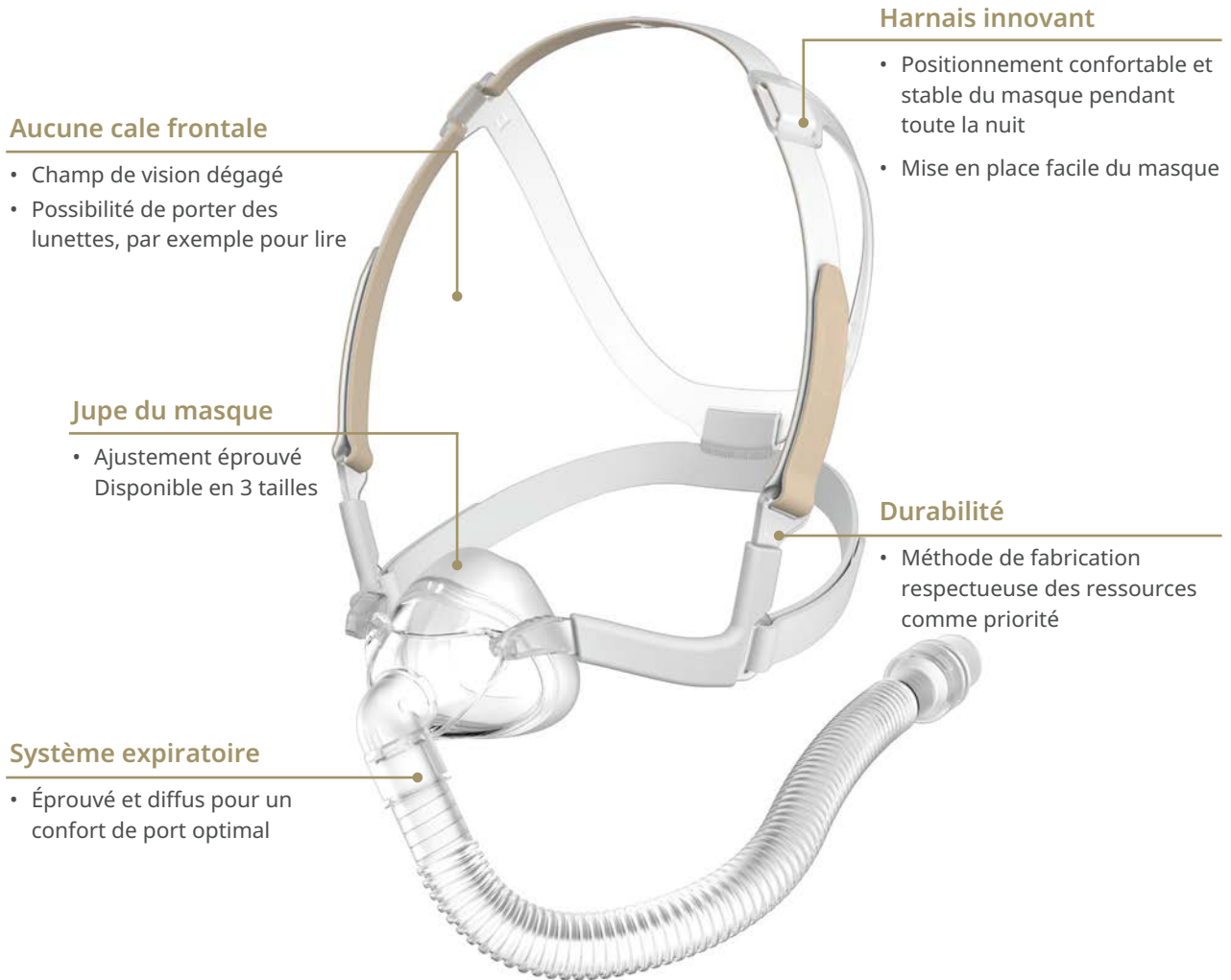

## JULIA, le nouveau masque nasal destiné aux patients souffrant d'apnée du sommeil, est petit, à peine perceptible, durable et offre une vision dégagée.

### « Éprouvé » prend un nouveau sens.

JULIA a adopté l'excellent ajustement de CARA. Le design de la jupe du masque est adapté à la forme compacte de JULIA et lui confère une apparence visuellement encore plus petite.

Le système expiratoire répond aux normes Löwenstein : silencieux et diffus.

### Masque et lunettes

En plus d'être éprouvé, JULIA dispose aussi de nouveautés. Il offre un champ de vision dégagé sans cale frontale.

La routine du soir tant appréciée au cours de laquelle on lit ou on regarde la télévision avec des lunettes et le masque peut être préservée.

### Harnais innovant.

Le positionnement stable du masque pendant le sommeil est essentiel. Il est notamment rendu possible grâce au harnais. En particulier lorsque le masque est utilisé sans cale frontale. La stabilité est garantie grâce au serre-tête en plastique moulé en 3D flexible.

Celui-ci aide à mettre en place le harnais et le masque avec une grande facilité et sans torsion. De plus, il confère au système du masque la stabilité nécessaire dans toutes les positions de sommeil.

# JULIA est à la fois durable et « made in Germany ». Un masque pour l'avenir.

## Créer un avenir durable.

Les processus de production établis et éprouvés doivent être repensés en mettant l'accent sur la durabilité afin de rester pérennes.

## Un traitement respectueux des ressources.

La fabrication conventionnelle de textiles nécessite une grande quantité d'eau, d'électricité et de produits chimiques. Le processus de coloration de JULIA a été modifié de façon durable : des pigments de couleur sont mélangés à la matière première avant d'être appliqués sur les fils.

Les économies suivantes ont ainsi pu être réalisées<sup>1</sup> :



↓ -90 %

Eau douce



↓ -94 %

Eaux usées



↓ -66 %

Consommation  
énergétique



↓ -70 %

Produits chimiques


<sup>1</sup> Valeurs déterminées par le fabricant

## Utilisation de matières premières renouvelables.

Le sachet d'emballage de JULIA est composé à 80 % de matières premières renouvelables issues de cannes à sucre.

## Recyclable.

« Circularité plutôt que linéarité », c'est-à-dire conserver les matières premières le plus longtemps possible dans le circuit économique et éviter les déchets. Les pièces du masque JULIA sont conçues ainsi : pas de mélange de matériaux différents pour garantir les possibilités de recyclage.

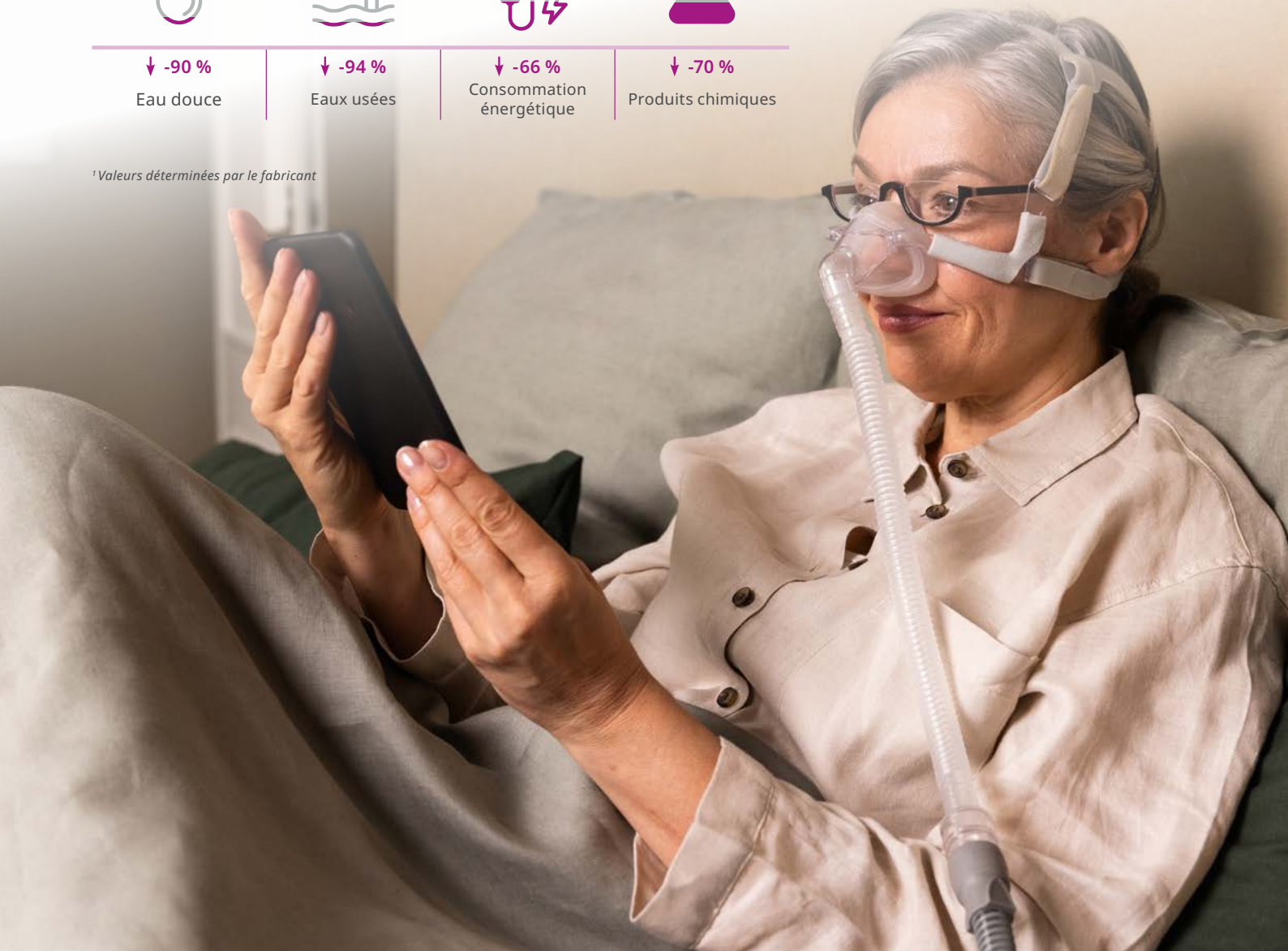

## Pièces de rechange



**Harnais JULIA avec clips pour harnais**  
Petit : LMT 26714  
Standard : LMT 26795



**Revêtement de branche droite et gauche**  
LMT 17823



**Jupe du masque JULIA**  
Taille S: LMT 26636  
Taille M: LMT 26637  
Taille L: LMT 26638



**Tuyau du masque avec adaptateur**  
LMT 26713

Vous trouverez de plus amples informations concernant nos solutions de traitement, nos accessoires et nos systèmes de masque sur [loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

### Caractéristiques techniques JULIA

Classe produit selon le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux	II a
Dimensions (l x h x p)	
• Taille S	50 x 61 x 75 mm
• Taille M	57 x 61 x 73 mm
• Taille L	63 x 65 x 73 mm
Poids	
• Taille S	78 g
• Taille M	78 g
• Taille L	79 g
Volume mort	
• Taille S	65 ml
• Taille M	71 ml
• Taille L	87 ml
Raccord de flexible Cône selon EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (mâle)
Pression thérapeutique	4 hPa – 30 hPa
Plage de température	
• Fonctionnement	+5 °C à +40 °C
• Transport et stockage	-20 °C à +70 °C
Résistance à l'écoulement	
• à 50 l/min	0,8 hPa
• à 100 l/min	2,9 hPa
Valeur d'émission acoustique à deux chiffres indiquée selon ISO 4871 :	
• Niveau de pression acoustique	18 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique	26 dB(A)
• Facteur d'incertitude	3 dB(A)
Durée de vie	5 ans
Durée d'utilisation	Jusqu'à 12 mois <sup>1</sup>
Normes appliquées	EN ISO 17510: 2020

### Désignation de l'appareil

Désignation de l'appareil	Taille	N° d'article
JULIA	S	LMT 26710
JULIA	M	LMT 26720
JULIA	L	LMT 26730
JULIA avec 2e jupe du masque	S	LMT 26710-1000*
JULIA avec 2e jupe du masque	M	LMT 26720-1000*
JULIA avec 2e jupe du masque	L	LMT 26730-1000*

\* Jupes de masque de taille identique contenues dans les fournitures et accessoires

### Mentions légales

Dénomination :	Masque JULIA
Indications :	Masque destiné à acheminer le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) de façon non invasive pour le traitement de l'apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à domicile ou par plusieurs patients en milieu médical.
Classe du dispositif médical :	IIa
Organisme notificateur :	TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg - Germany
Bon usage :	Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif
Remboursement :	Pris en charge dans le cadre de prestation de soin à domicile ou en milieu hospitalier : consultez les modalités sur le site <a href="http://www.ameli.fr">www.ameli.fr</a>
Fabricant :	Löwenstein Medical Technology - Allemagne
Distributeur :	Löwenstein Medical France
Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.	

CE 0197

<sup>1</sup> La durée d'utilisation dépend du nettoyage et des produits de nettoyage utilisés, de la durée de port quotidienne, de la pression thérapeutique et du débit sudoral. L'utilisation de la seconde jupe du masque (disponible en option) ne prolonge pas la durée d'utilisation.

Made in Germany



Gedrukt op 100% gerecycled papier

Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalweg 40  
22525 Hambourg, Allemagne

**Ventes + Service**  
Löwenstein Medical France  
6, Rue de l'Aulnaye-Dracourt  
91300 Massy, France  
T. +33 (0)1 69 35 53 20  
[france@loewensteinmedical.com](mailto:france@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Ventes + Service**  
Löwenstein Medical Schweiz  
Seestrasse 14b  
5432 Neuenhof, Suisse  
T. +41 (0)56 4 16 41 26  
F. +41 (0)56 4 16 41 21  
[info@loewensteinmedical.ch](mailto:info@loewensteinmedical.ch)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Maison mère**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Allemagne  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)



With people in mind

