

LÖWENSTEIN
medical

JULIA




Mais espaço para os sonhos.

 With people in mind

Pequena no formato – Grande em conforto e liberdade.

JULIA é uma pequena máscara nasal particularmente adequada para quem dorme de lado e usa óculos. Adapta-se a muitas formas de rosto diferentes e dispensa um apoio de testa. Quem quiser relaxar durante o ritual noturno pode colocar simultaneamente a máscara e os óculos.

Graças ao design compacto e à almofada da máscara de ajuste à medida, a JULIA assenta quase sem peso no rosto, acompanha todos os movimentos, proporcionando assim mais liberdade. Mais liberdade e mais espaço para os sonhos.

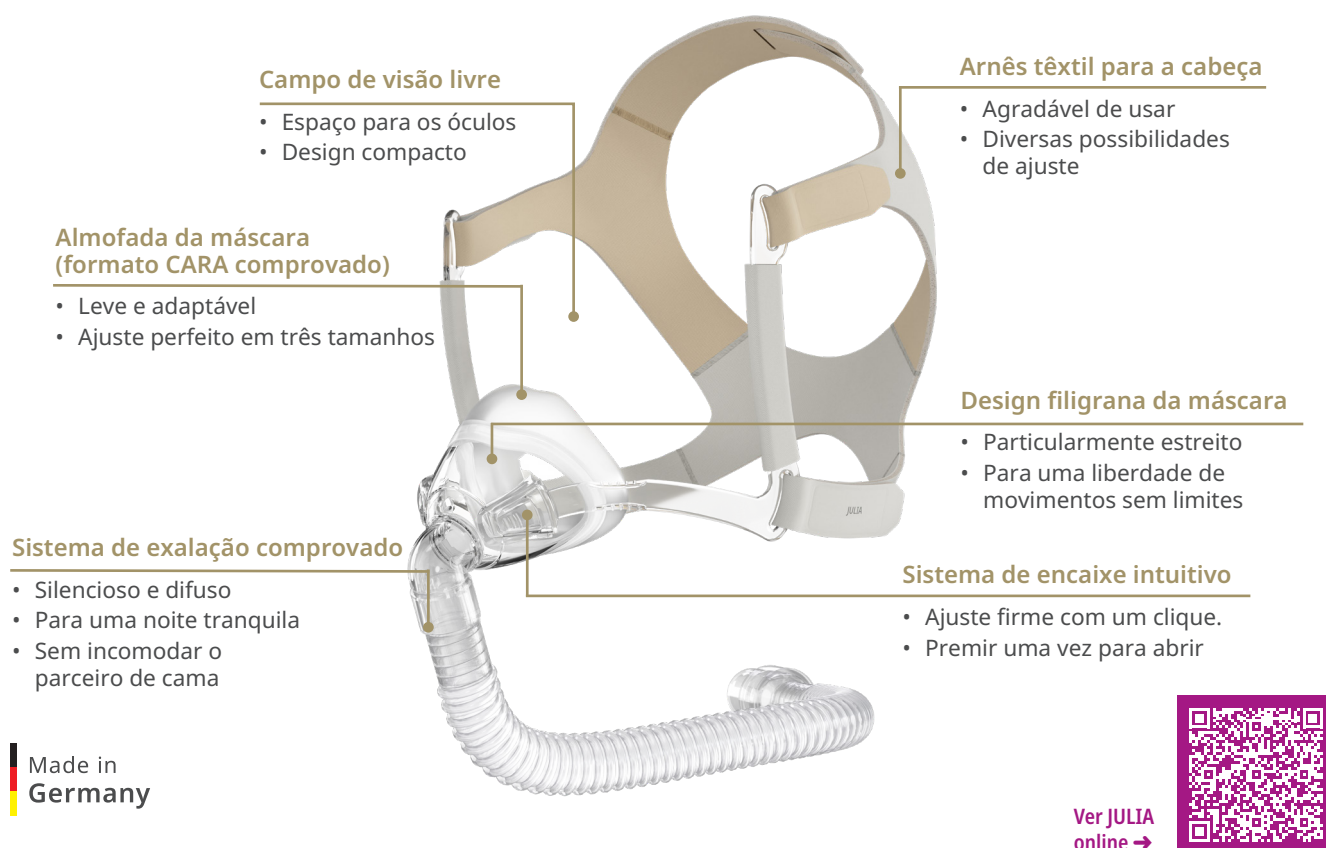

Ajuste preciso, design compacto

Com a JULIA, a terapia parece completamente natural. O design compacto oferece liberdade durante a rotina noturna e também durante o sono. O excelente ajuste foi inspirado no comprovado modelo CARA. A almofada da máscara adapta-se aos contornos individuais do seu rosto e proporciona um conforto duradouro, independentemente da forma e do tamanho do seu rosto.

Campo de visão livre para quem usa de óculos e dorme de lado

Uma novidade da JULIA é o campo de visão livre sem apoio de testa. Ler, ver televisão ou olhar para o telemóvel à noite é agora possível com máscara e óculos. Quem dorme de lado beneficia especialmente da ausência do apoio da testa. Nada pressiona nem desliza nesta posição.

Arnês têxtil confortável para a cabeça

A arnês para a cabeça da JULIA garante uma fixação estável da máscara e, graças aos materiais macios e suaves para a pele, proporciona simultaneamente uma sensação agradável na pele.

Circuito da máscara estreito para uma liberdade de movimentos sem limites

O design filigrana da máscara inclui um circuito da máscara adequado. É significativamente mais estreito do que os circuitos convencionais dos dispositivos e muito flexível. Durante os movimentos noturnos, adapta-se aos movimentos do utilizador, evitando perturbações do sono.

Sistema de encaixe intuitivo

O encaixe da máscara é fácil de utilizar. O clipe pode ser facilmente inserido no corpo da máscara e encaixa com um clique audível. De manhã, o encaixe pode ser libertado pressionando um dedo na superfície lateral estriada.

Sustentabilidade

Processamento de forma a preservar os recursos

No arnês para a cabeça desta máscara, conseguimos implementar uma melhoria sustentável que reduz significativamente o consumo de água, energia e produtos químicos. Atualmente, podemos combinar a produção de fibras e o processo de tingimento, eliminando completamente a etapa adicional de tingimento.

Com matérias-primas renováveis

A embalagem da JULIA é composta em 80% por cana-de-açúcar, uma matéria-prima renovável.

Fácil de reciclar

As peças da máscara JULIA foram concebidas quase exclusivamente de forma a poderem ser recicladas por tipo de material. Durante o fabrico, evitamos combinações de materiais que impeçam a reintegração da máscara no ciclo de reciclagem no final do seu ciclo de vida.

Isto permite obter as seguintes poupanças¹:



↓ -90%
Água doce



↓ -94%
Águas residuais



↓ -66%
Consumo de energia



↓ -70%
Produtos químicos




¹ Valores determinados pelo fabricante

Peças de substituição



**Arnês para a cabeça JULIA
incl. clips do arnês**

standard: LMT 26856
large: LMT 26949

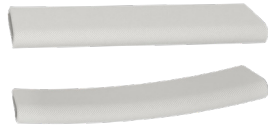

**Capas, 2 unid.
LMT 17830**



Almofada da máscara JULIA

Tam. S: LMT 26636
Tam. M: LMT 26637
Tam. L: LMT 26638



**Circuito da máscara
com conexões
LMT 26713**

Mais informações sobre as nossas soluções de terapia, acessórios e sistemas de máscaras podem ser encontradas em loewensteinmedical.com

Dados técnicos JULIA

Classe de produto conforme o regulamento MDR (UE) 2017/745	II a	Pressão terapêutica	4 cmH ₂ O - 30 cmH ₂ O
Dimensões (L x A x P)		Gama de temperaturas	
• Tamanho S	53 x 61 x 75 mm	• Funcionamento	+5 °C a +40 °C
• Tamanho M	58 x 60 x 76 mm	• Transporte e armazenamento	-20 °C a +70 °C
• Tamanho L	62 x 64 x 77 mm	Resistência ao fluxo	
Peso		• a 50 l/min	0,6 cmH ₂ O
• Tamanho S	77 g	• a 100 l/min	2,3 cmH ₂ O
• Tamanho M	78 g	Valor especificado de emissão de ruído de dois números de acordo com a norma ISO 4871:	
• Tamanho L	80 g	• Nível de pressão sonora	18 dB(A)
Volume do espaço morto		• Nível de potência sonora	26 dB(A)
• Tamanho S	68 ml	• Fator de incerteza	3 dB(A)
• Tamanho M	78 ml	Vida útil	5 anos
• Tamanho L	92 ml	Período de utilização	Até 12 meses ¹
Cone da conexão de circuito de acordo com a norma EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (macho)	Normas aplicadas	EN ISO 17510: 2020

¹ O período de utilização depende da limpeza e do produto de limpeza utilizado, do tempo de utilização diária, da pressão terapêutica e da secreção individual de suor. A utilização da segunda almofada da máscara (incluída opcionalmente) não prolonga o período de utilização.

Designação do dispositivo Tam. N.º do artigo

Designação do dispositivo	Tam.	N.º do artigo
JULIA	S	LMT 26710
JULIA	M	LMT 26720
JULIA	L	LMT 26730
JULIA incl. 2.ª almofada da máscara	S	LMT 26710-1000*
JULIA incl. 2.ª almofada da máscara	M	LMT 26720-1000*
JULIA incl. 2.ª almofada da máscara	L	LMT 26730-1000*

* A segunda almofada da máscara do mesmo tamanho está incluída no volume de fornecimento.

CE 0197

Made in
Germany



Impresso em
papel 100 % reciclado



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40
22525 Hamburg, Alemanha
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
loewensteinmedical.com

Distribuição + Assistência

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
Tel.: +49 2603 9600-0
Fax: +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

With people in mind

