



LÖWENSTEIN
medical



JULIA

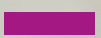

Mehr Raum für Träume.

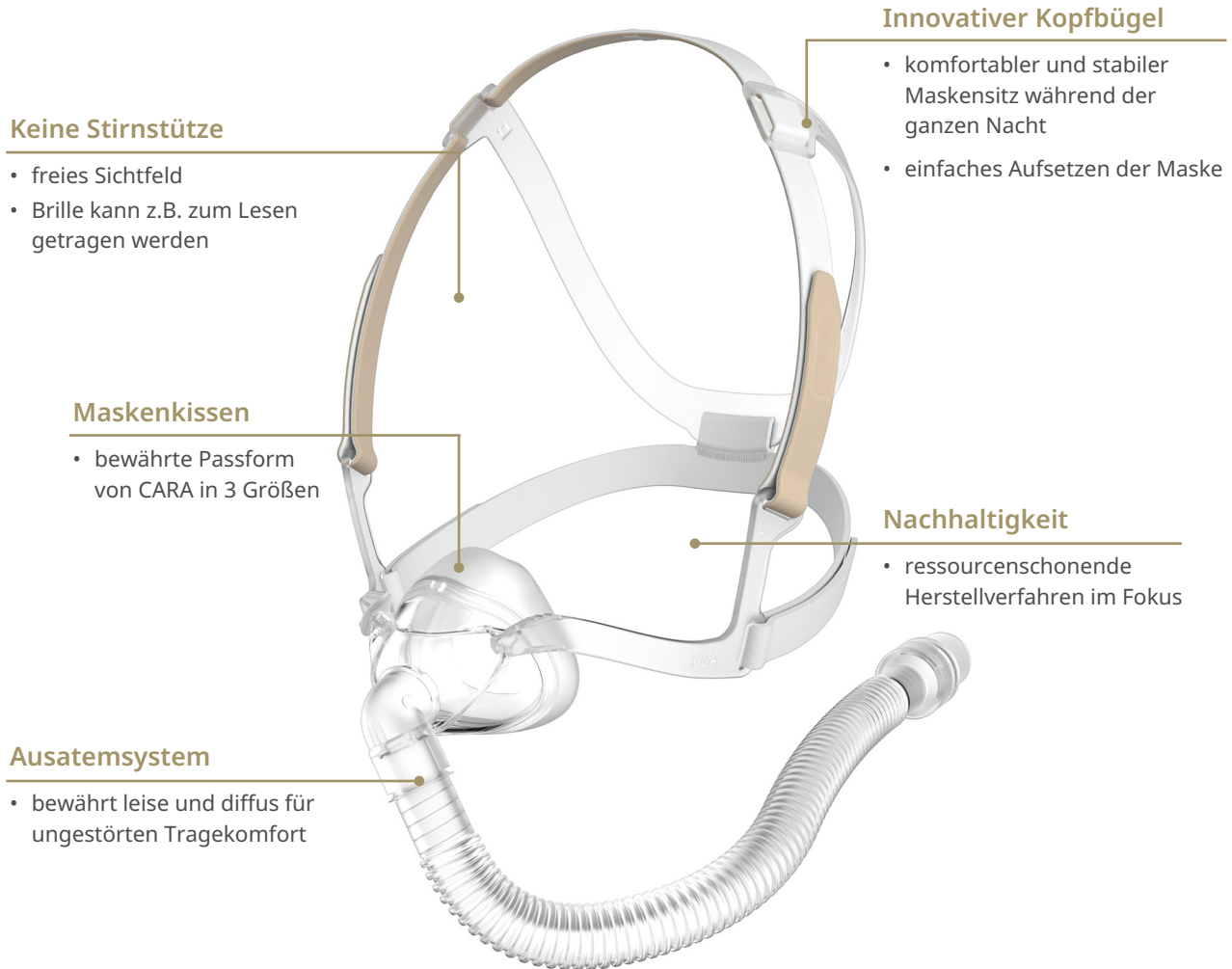

Keine Stirnstütze

- freies Sichtfeld
- Brille kann z.B. zum Lesen getragen werden

Maskenkissen

- bewährte Passform von CARA in 3 Größen

Ausatemsystem

- bewährt leise und diffus für ungestörten Tragekomfort

Innovativer Kopfbügel

- komfortabler und stabiler Maskensitz während der ganzen Nacht
- einfaches Aufsetzen der Maske

Nachhaltigkeit

- ressourcenschonende Herstellverfahren im Fokus

JULIA, die neue Nasalmaske für Schlafapnoe-Patienten, steht für klein, kaum spürbar, freie Sicht und nachhaltig.

Bewährtes neu gedacht.

JULIA hat die sehr gute Passform von CARA übernommen. Das Design des Maskenkissens schmiegt sich der kleinen Form von JULIA an und wirkt dadurch optisch noch kleiner.

Das Ausatemsystem entspricht dem Löwenstein Standard - leise und diffus.

Maske und Brille.

Neben Bewährtem gibt es bei JULIA auch Neues. Sie bietet ein freies Sichtfeld ohne Stirnstütze. Die liebgewonnene abendliche Routine lesen oder fernsehen mit Brille und Maske kann beibehalten werden.

Innovative Kopfbänderung.

Der stabile Maskensitz während des Schlafes ist das A und O. Einen wesentlichen Anteil hieran hat die Kopfbänderung. Insbesondere wenn die Maske ohne Stirnstütze auskommt. Dieses wird durch den Kopfbügel aus flexiblem, ergonomisch in 3D geformten Kunststoff gewährleistet.

Der stabile Kopfbügel hilft, die Kopfbänderung und Maske kinderleicht und verdrehsicher aufzusetzen. Zusätzlich gibt er dem Maskensystem den notwendigen Halt – in jeder Schlafposition.

JULIA ist nicht nur nachhaltig, sondern auch „made in Germany“. Eine Maske mit Zukunft.

Zukunft nachhaltig gestalten.

Etablierte und bewährte Produktionsprozesse müssen neu und nachhaltig gedacht werden, um zukunftsfähig zu bleiben.

Ressourcenschonend verarbeiten.

Die konventionelle Herstellung von Textilien benötigt viel Wasser, Strom und Chemikalien. Der Färbeprozess wurde bei JULIA nachhaltig geändert: Farbpigmente werden bereits dem Rohstoff beigemischt, bevor es zu Garn verarbeitet wird.

Dadurch werden folgende Einsparungen erzielt¹:



↓ -90 %
Frischwasser



↓ -94 %
Abwasser



↓ -66 %
Energieverbrauch



↓ -70 %
Chemikalien

¹Vom Hersteller ermittelte Werte

Nachwachsende Rohstoffe verwenden.

JULIAS Verpackungsbeutel besteht zu 80 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr.

Recyclingfähig.

„Mehr Kreisverkehr, weniger Einbahn“, d.h. Rohstoffe so lang wie möglich im Wirtschaftskreislauf halten und Abfall vermeiden. JULIAS Maskenteile sind entsprechend konzipiert: Keine Vermischung von verschiedenen Materialien, um die Recyclingfähigkeit sicherzustellen.



Ersatzteile



Kopfbänderung JULIA
inkl. Bänderungsclips
LMT 26714



Maskenkissen JULIA
Gr. S: LMT 26636
Gr. M: LMT 26637
Gr. L: LMT 26638



Maskenschlauch mit Adaptern
LMT 26713

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.com

Technische Daten JULIA

Produktklasse nach Verordnung MDR (EU) 2017/745	II a	Therapie­druck	4 hPa – 30 hPa
Abmessungen (B x H x T)		Temperaturbereich	
• Größe S	50 x 61 x 75 mm	• Betrieb	+5 °C bis +40 °C
• Größe M	57 x 61 x 73 mm	• Transport und Lagerung	-20 °C bis +70 °C
• Größe L	63 x 65 x 73 mm		
Gewicht		Strömungswiderstand	
• Größe S	78 g	• bei 50 l/min	0,8 hPa
• Größe M	78 g	• bei 100 l/min	2,9 hPa
• Größe L	79 g		
Totraumvolumen		Angegebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871:	
• Größe S	65 ml	• Schalldruckpegel	18 dB(A)
• Größe M	71 ml	• Schalleistungspegel	26 dB(A)
• Größe L	87 ml	• Unsicherheitsfaktor	3 dB(A)
Schlauchanschluss	Ø 22 mm (männl.)	Lebensdauer	5 Jahre
Konus nach EN ISO 5356-1		Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹
		Angewandte Normen	EN ISO 17510: 2020

¹ Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Reinigung und der verwendeten Reinigungsmittel, von der täglichen Tragedauer, vom Therapie­druck und von der individuellen Schweißsekretion. Die Nutzung des zweiten Maskenkissens (optional enthalten) verlängert nicht die Gebrauchsdauer.

Gerätebezeichnung	Gr.	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JULIA	S	LMT 26710	beantragt
JULIA	M	LMT 26720	beantragt
JULIA	L	LMT 26730	beantragt
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	S	LMT 26710-1000*	beantragt
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	M	LMT 26720-1000*	beantragt
JULIA inkl. 2. Maskenkissen	L	LMT 26730-1000*	beantragt

* Maskenkissen derselben Größe im Lieferumfang enthalten

© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.



p10401 de2312



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

