




Interface patient

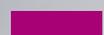

La solution pour une meilleure observance
thérapeutique

Interface patient

Nos masques pour soins à domicile et hospitaliers



Les exigences relatives aux masques de ventilation utilisés dans le cadre des **soins à domicile** (médecine du sommeil et ventilation pour consultations externes) sont très variables. Les masques doivent non seulement offrir un confort d'utilisation, mais aussi un ajustement parfait. Ils doivent également être compacts, légers et faciles à utiliser. Le système expiratoire doit être discret, avec un débit diffus, et une rotule articulée doit assurer une bonne liberté de mouvement. Enfin, le masque doit être visuellement attrayant.

Les attentes liées aux masques utilisés **en milieu hospitalier** sont différentes. Ces masques de ventilation ont besoin d'une bonne étanchéité et d'un ajustement stable afin de résister à des pressions élevées. C'est un point particulièrement important, car la différence de pression entre l'inspiration et l'expiration est souvent considérable. En fonction de leurs utilisations spécifiques, les masques doivent être réutilisables (compatibles avec


la décontamination) ou à usage unique (jetables).

Satisfaire aux exigences liées à ces masques est la clé pour l'amélioration de l'observance thérapeutique et la réussite du traitement. Notre gamme de masques relève ce défi haut la main avec un vaste éventail de solutions.

Pour le segment des soins à domicile, nous offrons l'extraordinaire gamme CARA, la gamme JOYCEone adaptable, la gamme JOYCEeasy simple d'utilisation ainsi que les variantes d'équipement SilkGel éprouvées de la gamme JOYCE, en silicone et confortables. Dans le segment du milieu hospitalier, nous proposons le masque à usage unique JOYCEclinic Full Face ainsi que le nouveau masque de ventilation LENA qui peut être décontaminé et réutilisé.

Grâce à la diversité de notre offre, chaque patient peut trouver le masque qui lui convient le mieux.

À chaque besoin, le bon masque

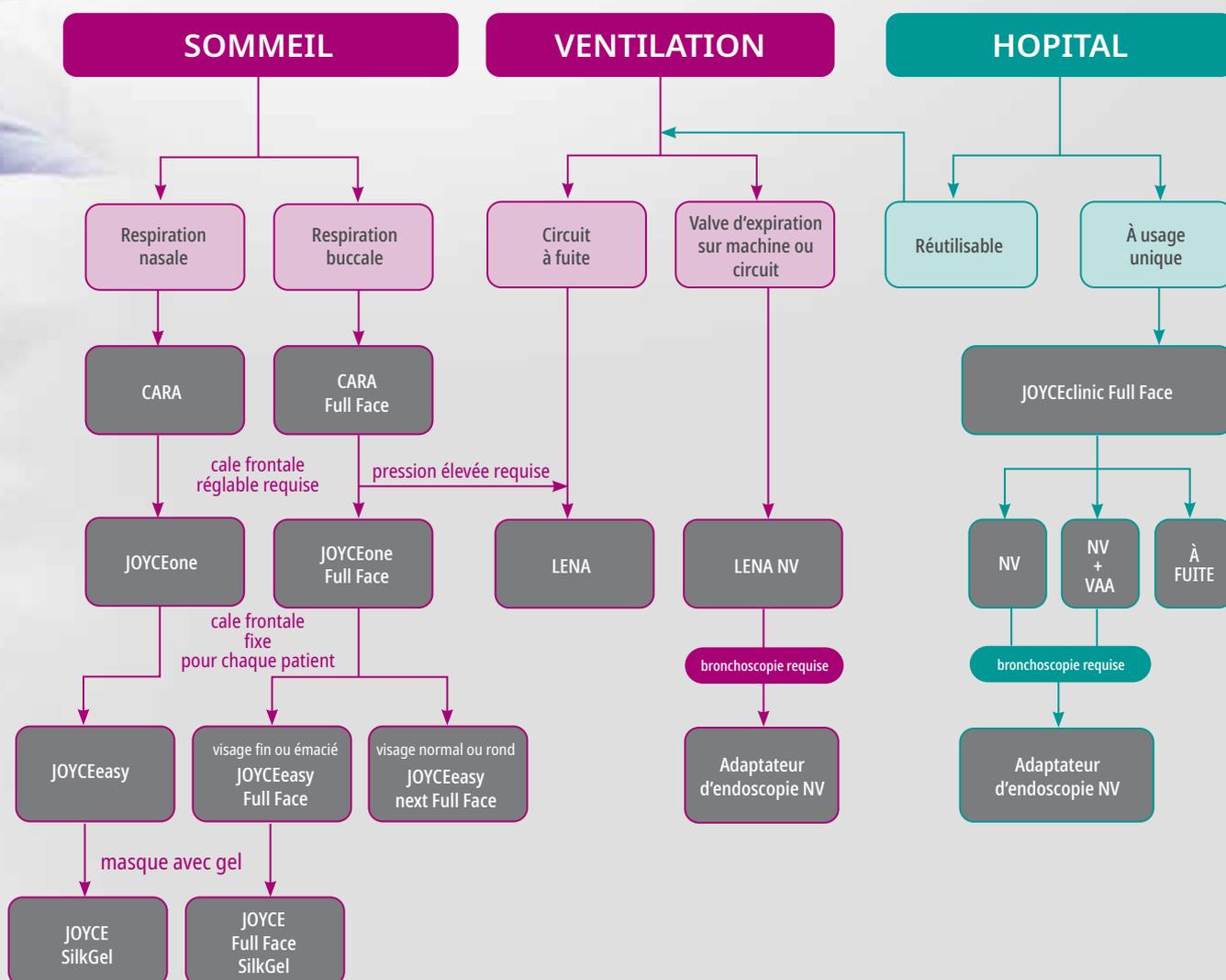

Nos masques CARA primés



Aperçu de nos masques



		CARA	CARA Full Face	JOYCEone	JOYCEone Full Face		JOYCEeasy next Full Face		JOYCEeasy	JOYCEeasy Full Face	JOYCE SilkGel	
		Masque nasal	Masque bucco-nasal	Masque nasal	Masque bucco-nasal		Masque bucco-nasal		Masque nasal	Masque bucco-nasal	Masque nasal	
		À FUIITE	À FUIITE	À FUIITE	À FUIITE	SANS FUIITE	À FUIITE	SANS FUIITE	À FUIITE	À FUIITE	À FUIITE	
Taille	XS	25590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Référence de commande	S	25600	25630	25260	25290	25270	25109	25159	25510	25910	26118
		M		25640				25119	25169	25520	25920	26128
		L	25610	25650				25129	25179	25530	25930	26138
		XL	—	—				—	—	—	—	—
Silicone		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
Gel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Plage de pression		4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	
Niveau sonore (db(A) à 10 hPa) Niveau de pression acoustique		18	19	18	19	—	13	—	18	3	15	
Rotule articulée		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	
Raccord de mesure de pression		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Ajout possible d'un système expiratoire externe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



avec double jupe



JOYCE Full Face SilkGel	JOYCE		JOYCE Full Face		NP 15	LENA		JOYCEclinic Full Face		
Masque bucco-nasal	Masque nasal		Masque bucco-nasal		Masque narinaire	Masque bucco-nasal		Masque bucco-nasal		
À FUITE	À FUITE	SANS FUITE	À FUITE	SANS FUITE	À FUITE	À FUITE	SANS FUITE	SANS FUITE	SANS FUITE + VAA	À FUITE
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26418	26110	26160	26410	26413	26755	26460	26960	26805/ 26857*	26845/ 26869*	26840/ 26866*
26428	26120	26170	26420	26423		26470	26970	26815/ 26858*	26855/ 26870*	26850/ 26867*
26438	26130	26180	26430	26433		26480	26980	26825/ 26859*	26865/ 26871*	26860/ 26868*
—	26140	26190	26440	26443	—	—	—	—	—	—
—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 35 hPa	4 – 35 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa
16,5	15	—	15	15	15	12	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	Raccord pour l'injection d'O ₂	—	—	—	—
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—

* par lot de 10

Ajustement et tailles

Coussins nasaux



CARA
trois tailles pour
95 % des visages



JOYCEone
une taille/plus large
et plus flexible au niveau
de la voûte nasale



JOYCEeasy
plus large au niveau de
la voûte nasale/tailles
plus longues que la série
JOYCE



JOYCE SilkGel
plus étroit au niveau de la
voûte nasale/avec gel



JOYCE
plus étroit au niveau de la
voûte nasale/Tailles S - XL



LENA
stable à des pressions
pouvant atteindre
35 mbar en trois tailles



CARA Full Face
trois tailles pour
90 % des visages



JOYCEone Full Face
une taille/plus large et
plus flexible au niveau
de la voûte nasale



JOYCEeasy next Full Face
plus large et plus long que
le modèle JOYCEeasy Full
Face/pressions plus élevées



JOYCEeasy Full Face
plus large au niveau de la
voûte nasale/tailles plus
longues que le modèle
JOYCE



JOYCE Full Face SilkGel
plus étroit au niveau de la
voûte nasale/avec gel



JOYCE Full Face
plus étroit au niveau de la
voûte nasale/Tailles S - XL

avec
double
jupe

Jupes pour masque facial



Accessoires



Raccord coudé NV

Outre la variante d'équipement standard (à fuite), nous offrons le kit raccord coudé NV pour masque facial.



Raccord coudé NV + VAA (valve anti-asphyxie)

Outre les raccords coudés vented et non-vented, nous proposons la variante non ventilé avec valve anti-asphyxie (VAA).



Adaptateur d'endoscopie

Endoscopie pendant un traitement VNI avec notre solution pour professionnels. Sur bon nombre de nos masques, il suffit de remplacer le raccord coudé par l'adaptateur d'endoscopie.



Sangle d'ouverture rapide

La sangle d'ouverture rapide est utilisée à la place des attaches de harnais. Les patients souffrant d'arthrite ou d'une mobilité restreinte (p. ex., à la suite d'un AVC) apprécient sa simplicité d'utilisation.



Harnais XL

Ce harnais est le meilleur choix pour les patients dont le périmètre crânien est supérieur à 60 cm. Il peut être combiné à tous les masques standard.



Silentflow 3

Le système expiratoire externe est utilisé avec les masques NV en milieu hospitalier. Deux extrémités : Ø 22 mm (mâle)

	Raccord coudé NV	Raccord coudé + VAA	Adaptateur d'endoscopie NV	Sangle d'ouverture rapide	Harnais XL (sans attaches)
CARA	—	—	—	—	●
CARA Full Face	—	—	—	25623	●
JOYCEone	—	—	—	—	●
JOYCEone Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy next Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy	—	—	—	—	●
JOYCEeasy Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCE SilkGel	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face SilkGel	26207	—	—	26560	●
JOYCE	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face	26207	—	—	26560	●
NP 15	—	—	—	—	—
LENA	15970	—	15968	26464	●
JOYCEclinic Full Face	25269	26834	15864	Inclus dans la livraison standard	—



LÖWENSTEIN medical

Ventes + Service

Löwenstein Médical France
6, Rue de l'Aulnay-Dracourt
91300 Massy, France
T. +33 (0)1 69 35 53 20
france@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

Ventes + Service

Löwenstein Medical Schweiz
Seestrasse 14b
5432 Neuenhof, Suisse
T. +41 (0)56 4 16 41 26
F. +41 (0)56 4 16 41 21
info@loewensteinmedical.ch
loewensteinmedical.com

Maison mère

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Allemagne
loewensteinmedical.com



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Allemagne



Mentions légales

Indications : Masques destinés à acheminer le débit d'air (avec ou sans adjonction d'oxygène) de façon non invasive pour le traitement de l'apnée du sommeil ainsi que pour la ventilation non invasive de patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation à usage multiple par un seul patient à domicile.

Classe du dispositif médical : IIa

Organisme notificateur : TÜV 0197 - Rheinland LGA Products GmbH, Nuremberg - Allemagne

Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif

Remboursement : Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr

Fabricant : Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG - Allemagne

Distributeur : Löwenstein Médical France SAS - France.

Ce document est destiné aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile.



© Protégé par le droit d'auteur.
Toute copie ou reproduction de quelque nature que ce soit requiert l'autorisation explicite préalable de Löwenstein Medical.